

# BRUKSANVISNING

## ELOFLEX S1

Les gjennom hele denne dokumentasjon før du bruker din Eloflex for å være sikker på at du bruker den på en forsvarlig måte, som ikke skader deg, omgivelsene eller scooteren din.



# Takk og lykke til!

Takk for at du valgte en Eloflex som hjelp. Det betyr mye for oss fordi vår visjon er å gjøre folks hverdag litt enklere og gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mer frihet. Vi håper du opplever begge deler ved hjelp av din Eloflex.

Vi tror du vil få mye glede av din nye hybrid scooter. Denne håndboken inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk og pleie. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne fullstendige dokumentasjonen før du bruker Eloflex for første gang. Vi foreslår også at du øver deg på å kjøre Eloflex på en rolig, åpen og flat overflate før du bruker den i andre sammenhenger.

Eloflex hybrid scooter er designet for brukere med mange forskjellige behov. Avgjørelser om Eloflex er egnet for brukeren tas alltid av operatøren eller forhandleren sammen med brukeren selv. Eloflex påtar seg inget ansvar for tilfeller der scooteren ikke er tilpasset brukerens behov.

En Eloflex bør primært brukes i standardversjonen. Hvis scooteren må tilpasses eller modifiseres på noen måte, må det kun utføres av ditt tekniske hjelpesenter eller av Eloflex. Vær oppmerksom på at skader og feil som skyldes manglende overholdelse av bruksanvisningen eller på grunn av dårlig vedlikehold, ikke dekkes av garantien.

*Lykke til og vi håper du får mye glede med din Eloflex.*

**Kjør forsiktig!**



Innholds	Side
Tiltenkt bruk	3
Slå sammen og slå opp	4
Juster setelengde og setehøyde	5
Løfting av armlenene	6
Tippesikringen	6
Manuell kjøring	6
Ekstern nøkkel	7
Belysning	7
Ladingsinstruksjoner	7
Kontrollpanel og kjøreinstruksjoner	8
Endre setebredde	9
Transport og lagring	9
Feilkoder	10
Sikkerhetsinstruksjoner ved kjøring	11
Generelle sikkerhetsinstrukser	13
Teknisk data	15
Kontakt	16

# Tiltenkt bruk

## Typeklassifisering og tiltenkt bruk

Eloflex scooter er utviklet for folk som har problemer med å gå eller ikke kan gå i det hele tatt, men som har en visjon, kroppslig evne og mental evne til å styre en scooter.

Eloflex scooter er designet for utendørs bruk, men er kompakt nok og smidig nok til innendørs bruk. Kapitlet "Tekniske data" på baksiden av dette dokumentet inneholder informasjon om hastighet, svingradius, rekkevidde, maksimal baneevne, maksimal vekt for brukeren, etc. Vi oppfordrer deg til å lese all sikkerhetsinformasjon i kapitlet "Sikkerhetsforskrifter" i dette dokumentet.

Eloflex er testet og godkjent i henhold til EN 12184:2014 – Klasse B (innendørs- og utendørsbruk). Eloflex er også godkjent etter ISO-7176, IEC60601 og batteriene er godkjent i henhold til UN38.3.

Eloflex elrullestoler oppfyller relevante krav i MDR 2017/745.

Klassifiseringen av medisinsk teknisk utstyr klasse 1 og CE-merkning er utført i overensstemmelse med bilag VIII kapittel III i MDR 2017/745. Vurderingsprosedyre i overensbestemmelse: bilag II og bilag III til MDR 2017/745. CE-merkingen blir ugyldig dersom man benytter deler eller tilbehør som ikke er godkjent for dette produkt.

## Behov

Formålet med en Eloflex er å kompensere for en skade eller funksjonshemming, og derfor anbefales det under følgende omstendigheter:

- Hvis brukeren har manglende evne til å gå eller sterkt begrenset evne til å gå, noe som gjør det vanskelig å bevege seg både lengre og / eller kortere avstander utendørs.
- Hvis det er behov for å forlate hjemmet for å komme seg ut i frisk luft eller for å besøke stedene som vanligvis besøkes for at dagligdags virksomhet skal utføres.
- Når brukeren har problemer med å komme seg til, eller gjør arbeid eller aktiviteter på grunn av deres mobilitetsproblem.

## Tilbehør

Ladere og vesker med enklere verktøy er tilgjengelige når de leveres i oppbevaringsposen under setet.

## Brukervennlighet

Bruk eloflex scooteren kun når den er i full funksjonell stand. Ellers setter du deg selv og andre i fare.

Følgende liste inneholder ikke alle mulige situasjoner. Den beskriver bare visse situasjoner som kan påvirke brukervennligheten til scooteren.

- Ikke bruk scooteren hvis batteriene er defekte eller deformerte
- Ikke bruk scooteren hvis motoren går rykkende eller med for mye støy
- Ikke bruk scooteren hvis bremsefunksjonen ser ut til å fungere feil
- Ta kontakt med ditt tekniske senter eller forhandler hvis dekkene er slitt
- Ta kontakt med ditt tekniske senter eller forhandler hvis du merker skade på armlenet, setet, ryggstøtten, styret eller andre deler av scooteren
- Hvis du oppdager skade på det elektriske systemet (kabler, batterier, ladere osv.), må du kontakte hjelpemiddelsentralen eller forhandleren.

## Garantert

Du har alltid to års garanti på din Eloflex scooter. Garantivilkårene er i tråd med gjeldende nasjonale og generelle forretningsvilkår og lover. De detaljerte garantivilkårene kan lastes ned på [www.eliflex.se](http://www.eliflex.se). Vær oppmerksom på at du bør oppbevare den originale esken til Eloflex i garantiperioden (esken kan brettes og legges bort).

## Levetid

Det beregnede livet til en Eloflex er 5 år. Produktets levetid påvirkes imidlertid sterkt av hvordan det brukes og administreres. En Eloflex kan ha en betydelig lengre levetid hvis du tar vare på den og bare bruker den i tråd med informasjonen i dette dokumentet.

## Sikkerhetsforskrifter og -risikoer

LES KJØREINSTRUKSJONER OG SIKKERHETSINSTRUKSJONER, FRA SIDE 11, NØYE FØR DU BRUKER ELOFLEX SCOOTER.



# Slå opp og legge sammen

## Slå opp

### Trinn 1

Plasser den sammenlagte scooteren på bakken som vist til høyre. Løft styret ved å løfte det opp og fremover. Styret låses deretter ved hjelp av klemmen som er plassert i hengslet nederst i styresøylen. For å feste klemmen, vri den svarte plasticsikringen over klemmen.



### Trinn 2

Ta tak i ryggstøet og trekk oppover for å åpne stolen. Hold fast med én hånd på styret.



### Trinn 3

Lukk låsekroken på baksiden av scooteren - dette er veldig viktig! Kontroller at låsekroken klikker seg inn.



Det er veldig viktig at du lukker låsekroken før du bruker scooteren.

## Legge sammen

### Trinn 1

Åpne låsekroken som vist på bildet til høyre.



### Trinn 2

Legg en hånd foran på styret. Ta tak i toppen av ryggstøet med den andre hånden og brett den fremover. Trykk stolen sammen som vist til høyre.



### Trinn 3

Åpne låseklemmen nederst i styresøylen ved å slå av sikkerhetskroken og åpne kroken. Brett deretter ned styret og plasser det på toppen av det brette setet.



# Juster setelengde og -høyde

## Øk setelengden

Kontroller at stolen er i kjøremodus og slått på. Trykk og hold pil opp for å utvide scooteren.



## Reduser setelengden

Kontroller at stolen er i kjøremodus og slått på. Trykk og hold nede pil ned for å redusere avstanden.



## Juster setehøyden

Pass på at stolen er i hevet stilling. Fjern deretter seteputen. Trekk den svarte ledningen under forkanten av stolen. Mens du holder kabelen i en anspent posisjon, er bakkanten av setet nå justert til ønsket posisjon (tre forskjellige posisjoner). Når setet er i ønsket posisjon, plasseres forkanten av setet på samme nivå som bakkanten. Slipp kabelen for å låse setet i hullet som er på samme nivå som bakkanten.



# Løfting av armlenene

## Trinn 1

For å løfte armlenene ved ombordstigning og avstigning, løsner du først låsen ved å dreie låsehendelen en halv omdreining.

Løft deretter armlenene.



**Det er viktig at du låser armlenene når du**

**har brettet dem ned igjen ved å dreie låsehendelen tilbake en halv omdreining.**

## Tippesikring

Tippesikringen har to posisjoner.

En for kjøremodus og en for når scooteren er plassert i stående stilling, for eksempel ved lagring. Du kan enkelt endre posisjonen ved å justere tippesikringene manuelt.

**NB!** Tippesikringen må alltid være i kjørestilling (som vist) når scooteren brukes.



## Manuell kjøring

Slå av den elektriske scooteren. Trykk deretter de røde spakene på motorene (se bilde) for å koble fra de magnetiske bremsene. I denne posisjonen kan scooteren rulles manuelt fritt.

**Obs!** Hvis scooteren må flyttes manuelt, må de magnetiske låsene alltid være av.



**Viktig!**

**Spark ALDRI de røde spakene. Bruk kun håndkraft.**

# Nøkkel

Din Eloflex scooter kommer med en eksterne nøkkel. Den eksterne nøkkelen kan brukes til å låse / låse opp din elektriske scooter. Når scooteren er i låst posisjon, kan den ikke kjøres.



# Belysning

Din Eloflex scooter har front- og bakkelysning for økt sikkerhet. For å slå på lysene, trykk på lampeikonet på venstre side av styret. Det er også bremselys og blinklys. Blinklysene brukes med de to pilene på venstre side av styret. Bremselyset aktiveres når scooteren står stille, når du slipper gassen og når du bremser med bremseknappen.



# Ladeinstruksjon

## Slik lader du scooteren

Begynn med å slå av Eloflex. Koble laderen til stikkkontakten foran på styret. NB! Vri lokket til siden, ikke trekk det! Kontroller at plasseringen av kontaktene samsvarer med hverandre. Sett deretter laderens strømkabel inn i et vegguttak.

Lading indikeres av en lampe på laderen. Rødt lys betyr at lading pågår. Etter omtrent tre timer lades batteriene til 90 prosent. Stolen kan nå brukes igjen.

Etter ca. 5-8 timer lyser lampen på laderen grønt og batteriene er fulladet. Under lading blir laderen selv varm, og dette er helt normalt.



For maksimal batterilevetid bør ladingen foregå i omtrent fem timer når stangen på batteriindikatoren har falt til en tredjedel. Batteriene blir ikke skadet ved å lades for vedlikehold, men for maksimal levetid anbefaler vi at du kobler fra laderen når batteriene er fulladet.



**VIKTIG!**  
Koble  
**ALDRI**  
i laderen direkte  
i batteriet.

Lading av batteriene kan gjøres ned til -10 grader. Ved lading ved lavere temperaturer vil ikke batteriene være fulladet. Hvis Eloflex brukes i temperaturer under null, vil kjørelengden bli påvirket. Ved -10 grader kan for eksempel kjørelengde reduseres med opptil 50 %.

# Styrepanel

Øk hastigheten

Av og på-knappen

Reduser hastigheten



Øk setelengden

Elektronisk frikobling

Reduser setelengden

Belysning

Blinklys venstre

Brems



Blinklys høyre

Horn

**Informasjonsvisning:** Displayet på scooteren har 2 forskjellige visningsmoduser, en som viser oppdatert informasjon om hastighet, girvalg, frontlykter og blinklys. Den andre skjermmodusen lyser i tilfelle feil på scooteren. Den viser gjeldende feilkode, batterispennning og strømgir.

Revers

Gass



**Batterikontroll:** Dette indikerer hvor mye strøm som er igjen i batteriene. Når batteriene er fulladet, lyser alle lysene. Når batteriene er tappet, slukkes lysene etter tur. Lad når to tredjedeler av lysene slukkes.

## Kjøreinstruksjoner

### For å starte

Når du starter scooteren (av og på-knappen), er den i parkeringsposisjon. Trykk deretter på den røde bremseknappen, og deretter kan du begynne å kjøre med gassen.


### For å rygge

For å rygge, trykk på den grå knappen under batteriindikatoren. En pipelyd kan høres når scooteren står i revers, du kan også se hvilken kjøreposisjon scooteren er i på displayet. Deretter reverserer du ved å trykke på gassen. Hvis du vil gå fremover igjen, klikker du den grå knappen på nytt for å avslutte ryggingen.



# Endre setebreddde

Du kan øke setebreddden ved å flytte ut armlenene ved hjelp av utvidelsessettet. Du kan velge å øke setebreddden med 5 eller 10 cm.

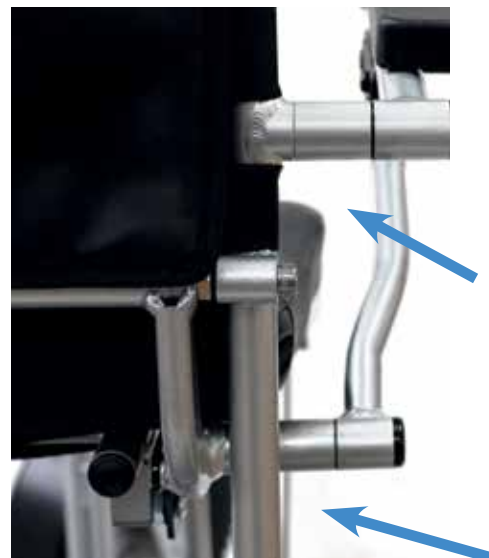

## Trinn 1

Løsne armlenene på hver side ved å skru av de to brakettene.

## Trinn 2

Monter utvideshylsen mellom stolen og armlenet. Monter armlenene igjen.

**Du bestiller utvidelsessett fra Eloflex.no.**

# Transport og lagring

- En sammenlagt scooter kan plasseres i bagasjerommet på en større bil. Bruk ramper for å få scooteren opp i bilen.
- En sammenlagt scooter kan stå vertikalt som vist på bildet til høyre for å ta mindre plass.
- Hvis scooteren ikke skal brukes på en stund, anbefaler vi at batteriene er fulladet før stolen lagres.
- Scooteren skal oppbevares innendørs i frostfrie, tørre og ventilerte områder. Lagringstemperatur 0-30 grader.
- Hvis du skal ta din Eloflex på flyet, anbefaler vi at du leser gjennom informasjonen vi har samlet på vår nettside om IATAs forskrifter [www.eloflex.se/faq](http://www.eloflex.se/faq)
- Når du transporterer i en service- eller funksjonshemmede buss, fest Eloflex til festepunktene som vises nederst på bildene. Vær oppmerksom på at Eloflex ikke er testet som bilsete. Vi anbefaler derfor alltid at brukeren flytter over i bilens egne seter.



# Feilkoder

## Feilkoder som kan oppstå på displayet

FEILKODE	ÅRSAK	LØSNING
<b>Left/Right solenoid fault</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Den venstre/høyre motormagnetiske bremsen er åpen.</li> <li>2. Tilkoblingsfeil på venstre motormagnetisk brems.</li> <li>3. Den venstre motorens magnetiske brems er ødelagt, eller kontrollere kan være skadet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lukk den magnetiske bremsen ved å trekke det røde håndtaket i lukket stilling.</li> <li>2. Kontroller at motorkontakten er riktig tilkoblet.</li> <li>3. Kontakt forhandleren for å få hjelp.</li> </ol>
<b>Left/Right Overcurrent</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Overspenning på grunn av overdreven motstand.</li> <li>2. Feil på motoren eller kontrollenheten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Systemet tilbakestilles når motstanden er borte.</li> <li>2. Kontakt forhandleren for å få hjelp.</li> </ol>
<b>Acceleration not zero</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gasshåndtaket er ikke i "null modus" når stolen utfører en oppstartstest.</li> <li>2. Feil på kontrollere.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Løsne gasshåndtaket og start scooteren på nytt.</li> <li>2. Kontakt forhandleren for å få hjelp.</li> </ol>
<b>Acceleration fault</b>	Svikt i gasshåndtak eller kontrollenhet.	Kontakt forhandleren for å få hjelp.
<b>MController not support</b>	Feil på kontrollere eller feil type kontrollere.	Bytt styrenhet.
<b>Com fault Dis to MC</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Løse eller feil tilkoblede tilkoblinger.</li> <li>2. Feil på kontrollere.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontroller at alle tilkoblinger er riktig installert.</li> <li>2. Kontakt forhandleren for å få hjelp.</li> </ol>
<b>Left/Right driver fault</b>	Kontrollerfeil.	Kontakt forhandleren for å få hjelp.
<b>Push rod Fault</b>	Kortslutning i lengdejusteringsmotoren, ødelagt lengdejusteringsmotor eller feil i kontrollere.	Kontroller tilkoblingen til lengdejusteringsmotoren, eller kontakt forhandleren for å få hjelp.
<b>Battery vol too high</b>	Feil batteritype eller ødelagt batteri.	Skift ut 24V-batteriet.
<b>Battery vol too low</b>	Batteriet er gammelt eller uladet.	Lad opp batteriet eller skift det ut hvis det er gammelt.
<b>Angle sensor fault</b>	Vinkelsensoren er ødelagt eller tilkoblingsfeil.	Kontakt forhandleren for å få hjelp.

## Sikkerhetsinstruksjoner ved kjøring

---

Det er fare for personskade ved å velte scooteren.

- Kjør kun på stigninger og graderinger som ikke overstiger den maksimale tillatte hellingen
- Bruk alltid tippesikring når du reiser med Eloflex
- Kjøring nedoverbakke bør alltid gjøres med lavere hastighet
- Unngå strekninger der det er fare for glatte eller isete overflater
- Forsøk aldri å kjøre opp eller ned trapper med din scooter
- Kjør aldri over hindringer som er høyere enn anbefalt maksimal høyde
- Unngå raske eller rykkete bevegelser med styret og plutselige endringer i kjøreretningen mens du kjører

Fare for å bli stående på avsidesliggende steder.

- En bruker med sterkt nedsatt bevegelse bør ikke kjøre lengre avstander utendørs alene

Fare for skade hvis en fot glir av fotstøtten og ender opp under den elektriske scooteren mens du kjører.

- Plasser alltid føttene midt på fotplaten mens du kjører

Fare for personskade hvis du kolliderer med andre gjenstander i smale passasjer.

- Kjør gjennom smale passasjer med lavest hastighet og maksimal oppmerksomhet

Det er fare for at scooteren vil velte hvis tippesikringen demonteres, skades eller monteres i en posisjon som avviker fra standardenheten.

- Tippesikringen må alltid monteres når du bruker den elektriske rullestolen
- Tippesikringen fungerer kun på faste overflater. På myke overflater som plener og snø kan tippesikringen miste effekten. Kjør derfor ekstremt forsiktig på myke overflater

# Kjøring

---

## Les

**Brukeren må lese disse sikkerhets- og kjøreinstruksjonene før Eloflex elektriske rullestol/scooter tas i bruk.**

## Kjøring

- Øvelse får deg til å jobbe. Øv deg på å kjøre Eloflex med en assistent ved å starte på et åpent område, helst utendørs, før du bruker scooteren din blant andre mennesker, i butikker eller restauranter, etc.
- Beveg deg fremover ved å holde gassen nede.
- Stopp ved å slippe ut gassen.

## Ryggning

Reverser ved å trykke på reverseringsknappen, og kjør deretter bakover ved å holde gassen nede. Trykk på tilbakeknappen igjen for å gå fremover igjen. Husk alltid å se tilbake før du begynner å rygge for å sikre at ingen person eller ting er i veien.

## Snu

Sving ved å dreie styret i én retning. Se opp slik at ingenting er i veien for deg når du svinger.

## Sving

Sving når du kjører ved å dreie forsiktig med styret i samme retning som du vil svinge. Senk alltid hastigheten når du svinger.

## Hinder

Øv deg på å unngå og krysse hindringer. Styr litt til siden samtidig for å unngå hindringer. Husk å senk farten når du nærmer deg hindringer.

## Rask kjøring

Øk hastigheten gjennom knappene på styret. Husk å roe ned så snart du føler deg utrygg, hvis du skal snu eller hvis du nærmer deg et hinder.

## Kjøring over hindringer

Kjør sakte opp til hindringen og sørg for at forhjulet er i kjøreretningen. Deretter beveger du deg sakte fremover mens du lener deg bakover for å komme over hindringen. Eloflex er testet og godkjent for hindringer opp til maksimalt 6 cm.

## Kjøring i en skråning

### Kjøring på hellende overflate

Prøv å kjøre rett opp eller rett ned på en skrå overflate. Len deg litt fremover mens du kjører oppover og bakover mens du kjører nedoverbakke, for å opprettholde tyngdepunktet. Unngå lateral kjøring hvis mulig og kompensér for enhver sidehelling ved å lene seg i motsatt retning. Kjør alltid sakte på skrå overflater. Unngå overflater som skrår mer enn 9 grader.

## Kjør heis

Pass på at du kontrollerer bredden på løftedøren og hvor raskt døren lukkes før du går inn i heisen. Husk at du kanskje må trekke deg ut av heisen hvis den ikke er stor nok til at du kan snu.

## Kjøring på veien

Kjør først og fremst på fortau, gangveier og sykkelstier med Eloflex.

## Kryss kjørebane

Hvis det er mulig, velg alltid å krysse veien på en fotgjengerovergang. Vær oppmerksom på å krysse biler. Bruk eventuelt den skråstilte delen av fortauet. Unngå fortauskanter som er høyere enn 6 cm (2 tommer).

## Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Det er fare for personskade hvis scooteren brukes til andre formål enn de som er beskrevet i dette dokumentet.

- Bruk scooteren kun i henhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen.

Det er fare for personskade hvis scooteren brukes ved redusert tilstand.

- Ikke bruk scooteren når kjøreevnen din er svekket på grunn av for eksempel sykdom, medisiner eller alkohol.

Det er fare for personskade hvis scooteren ufrivillig settes i gang.

- Slå av scooteren før ombordstigning og avstigning, eller hvis det er fare for at du, en annen person eller en gjenstand kan komme i kontakt med styret.
- Når motorene er løsnet, virker ikke bremsene. Derfor kan rullestolen bare skyves på flat grunn, aldri i skråninger. La aldri scooteren stå i eller i nærheten av bakker med avkoblede motorer.

Det er fare for personskade hvis den elektriske scooteren er slått av med for eksempel av / på-knappen eller ved å rive av en kabel, da den stopper med en hard rykk.

- Slipp gassen når du bremser i en nødssituasjon. Deretter stopper rullestolen automatisk.

Det er fare for skade ved å falle ut av scooteren

- Ikke beveg deg fremover, ikke bøy deg fremover mellom knærne eller len deg over kanten av scooteren, for eksempel for å nå gjenstander.
- Bruk alltid sikkerhetsbelte og juster det på nytt før hver reise.
- Kjør så nært som mulig til det nye setet når du flytter til et annet sete.

Det er fare for personskade hvis den maksimale tillatte belastningen overskrides.

- Vær oppmerksom på maksimal tillatt belastning (se kapittel "Tekniske data" på baksiden av dette dokumentet).
- Scooteren må kun brukes av en enkelt person. Bruk aldri scooteren til å transportere mer enn én person om gangen.

Det er fare for personskade og skade på scooteren hvis låsekroken som løsnes under sammenslåing ikke er riktig festet når scooteren brukes.

- Hvis låsekroken til scooteren ikke har klikket ordentlig på plass, kan scooteren plutselig legge seg sammen når den er i bruk, noe som kan tillate deg å falle ut av den.
- Sørg alltid for at låsekroken er i riktig posisjon før du bruker scooteren.

Det er fare for personskade og klemming når du slår opp og legger sammen scooteren.

- Legg alltid sammen scooteren som beskrevet i bruksanvisningen.
- Vær oppmerksom på at ingen eller ingenting klemmes når du slår den sammen og slår den opp.

Det er fare for personskade og skade på scooteren hvis den brukes i fuktige områder.

- Scooteren må ikke brukes ved dusjing.
- Scooteren må ikke brukes ved bading.

# Sikkerhet

---

## Kryss bybane

Kryss alltid jernbanesporet rett fra forsiden, aldri skrått fra siden.

Kryss aldri jernbanespor alene, ha alltid noen med deg som kan hjelpe deg.

## Bratte bakker

Vær forsiktig hvis du kjører i en bratt skråning, da stolen står i fare for forbikjøring. Eloflex er testet og godkjent for hellinger med maksimalt 9 grader. Ha alltid noen med deg som kan hjelpe deg.

## Høye kanter

Vær forsiktig når du kjører opp eller ut for en kant. Eloflex er testet og godkjent for kanter opp til maksimalt 6 cm. Ha alltid noen med deg som kan hjelpe deg.

## Transport

Vi anbefaler at du alltid har noen som kan hjelpe deg med å flytte til og fra Eloflex. Slå alltid av strømmen før du starter bevegelsen. Løft alltid opp armlenene og fotstøtten før du beveger deg for å gjøre det lettere å komme inn og ut av stolen.

## Ikke reparer selv

Prøv aldri å fikse en ødelagt scooter på egen hånd. Hvis du skrur eller prøver å reparere stolen selv, gjelder ikke garantien. Ta alltid kontakt med Eloflex eller butikken eller hjelpemiddelsentralen som har solgt/foreskrevet stolen. Modifiser aldri scooteren din på egen hånd.

## Inget leketøy

La aldri barn som vanligvis ikke bruker en scooter sitte i eller bruke eloflexen din.

## Renhold

Rengjør aldri Eloflex med rennende vann. Tørk den bare av med en fuktig klut.

Hvis eloflex er treg til å legges sammen eller slås opp, kan du smøre leddene med 5-56 eller silikonspray.

## Vær obs på varmen

La aldri Eloflex stå i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde, da batteriene kan bli skadet. Vær aldri i nærheten av en åpen ild med din Eloflex.

Du kan bruke Eloflex fra -10 grader opp til +45 grader. Ved temperaturer under null kan rekkevidden være redusert. Kjør alltid sakte på skrå overflater. Unngå overflater som heller mer enn 9 grader.

## Lagring

Oppbevar eloflexen utilgjengelig for barn når den ikke er i bruk.

Scooteren skal oppbevares innendørs i frostfrie, tørre og ventilerte områder. Lagringstemperatur 0-30 grader.

## Lader

Laderen må aldri tildekkes når den brukes til å lade Eloflex. Laderen blir varm og det er fare for uhell eller personskade.

## Batterier

Oppbevar aldri batterier i direkte sollys eller på et sted som kan nå temperaturer under null.

Batteriene skal oppbevares på et tørt og ventilert sted.

# Tekniske data

## FAKTA ELOFLEX S1

<b>VEKT</b>	41 kg inkl. 2 stk batterier
<b>HASTIGHET</b>	max 9 km/t
<b>REKKEVIDDE</b>	30 km
<b>MOTOR</b>	2 x børsteløse høyeffektsmotorer
<b>MOTOREFFEKT</b>	2 x 250 Watt
<b>BATTERI</b>	2 x Litium ION 10 AH / 24 V (240 Wh)
<b>BATTERIVEKT</b>	1,6 kg/stk
<b>LADETID</b>	3 tim
<b>SVINGRADIUS</b>	100 cm
<b>MAX HELLING</b>	9 grader
<b>HJUL</b>	3 stk 12" luftfylte
<b>SITTEHØYTE</b>	55-60 cm
<b>SITTEBREDDE</b>	45 / 50 / 55 cm
<b>SITTEDYBDE</b>	40 cm
<b>BRUKERVEKT</b>	Max 120 kg
<b>PUTE</b>	Kunstig skinn
<b>MÅL</b>	105-120 cm (L) x 63 cm (B) x 91 cm (H)
<b>MÅL SAMMENLAGT</b>	105 cm (L) x 63 cm x 55 cm (H)
<b>GARANTI</b>	2 år

Anbefalt lufttrykk for bakhjul = 2,5 kg.

## © Copyright Eloflex

Dette dokumentet inneholder opphavsrettsbeskyttet informasjon og kan ikke delvis eller fullstendig kopieres eller reproduseres uten skriftlig tillatelse fra Eloflex.

Eloflex forbeholder seg retten til å skrive trykkfeil i dette dokumentet, og vi forbeholder oss retten til å gjøre produktendringer.



Sungo Europe B.V.  
Olympisch Stadion 24, 1076DE  
Amsterdam, Netherlands  
SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd  
No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu

## Kontakta Eloflex

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, kan du kontakte hjelpemiddelsenteret eller forhandleren i første omgang. Hvis du vil ha direkte kontakt med oss, finner du kontaktinformasjon på nettstedet vårt, [www.eloflex.no](http://www.eloflex.no)



**Eloflex**  
**Hammarbacken 4B**  
**191 49 Sollentuna**

**Telefon: 010-18 33 100**  
**E-post: [info@eloflex.no](mailto:info@eloflex.no)**  
**Webb: [www.eloflex.se](http://www.eloflex.se)**