

MANUALE DI ISTRUZIONI

ELOFLEX H

Leggere questa documentazione prima di utilizzare Eloflex per assicurarsi di utilizzarla in modo sicuro e che non danneggi te, l'ambiente o la tua carrozzina elettronica.



ELOFLEX

Grazie e buona fortuna!

Grazie per aver scelto una carrozzina elettronica Eloflex. Significa molto per noi perché la nostra visione è rendere la vita quotidiana delle persone un po' più semplice e dare alle persone con disabilità una maggiore libertà. Ci auguriamo che tu possa sperimentare entrambi con l'aiuto della tua Eloflex.

Crediamo che apprezzerai molto la tua nuova carrozzina elettronica. Questo manuale contiene importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la cura. Ti invitiamo a leggere l'intera documentazione prima di utilizzare Eloflex per la prima volta. Ti consigliamo inoltre di allenarti a far funzionare la tua Eloflex in un luogo appartato, all'aperto e su una superficie piana prima di utilizzarla in altri contesti. La carrozzina elettronica Eloflex è progettata per utenti con tante esigenze diverse. La decisione, se Eloflex è adatta all'utente viene sempre preso da chi la ordina o dal rivenditore insieme all'utente stesso. Eloflex non si assume alcuna responsabilità per i casi in cui la carrozzina elettronica non è adattata alle esigenze dell'utente.

Eloflex dovrebbe essere utilizzata principalmente nel suo design standard. Se la carrozzina elettronica deve essere adattata o modificata in qualsiasi modo, questa operazione deve essere eseguita solo dal centro di assistenza o da Eloflex. Si ricorda che danni e guasti causati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso o da cattiva manutenzione non sono coperti dalla garanzia.

Buona fortuna e buon divertimento con la tua Eloflex.

Guida con attenzione!



Contenuto	Pagina	Pagina	
Destinazione d'uso	3	Cintura di sicurezza	9
Chiusura	4	Regolazione del supporto lombare	10
Ripiegamento	5	Regolare lo schienale	10
Installare il joystick	6	Regolazione del meccanismo di bloccaggio	11
Abbassare il joystick	6	Trasporto e conservazione	11
Istruzioni per la ricarica	7	Joystick	12
Guida manuale	7	Naviga nei menu	13
Regolare i braccioli	8	Istruzioni di sicurezza durante la guida	14-15
Poggiapiedi	8	Istruzioni generali di sicurezza	16-17
Maniglia di guida	9	Specifiche tecniche	18
Dispositivo antiribaltamento	9	Contattare Eloflex	18

Destinazione d'uso

Classificazione del tipo e destinazione d'uso

Le carrozzine elettroniche Eloflex sono state sviluppate per le persone che hanno difficoltà a camminare o non possono camminare affatto, ma che hanno capacità visive, capacità fisiche e capacità mentali di controllare una carrozzina elettronica. La carrozzina elettronica Eloflex è sufficientemente compatta e flessibile per l'uso in interni, ma è adatta anche per l'uso all'aperto. Il capitolo "Dati tecnici" sul retro di questo documento contiene informazioni su velocità, raggio di sterzata, autonomia, capacità di sollevamento massimo e porta massima per l'utente e così via. Ti invitiamo a leggere tutte le informazioni sulla sicurezza nel capitolo "Sicurezza" in questo documento.

Eloflex è testata e approvata secondo EN12184:2014 - classe B (uso interno ed esterno). Eloflex è anche approvata secondo ISO-7176, IEC60601 e le batterie sono approvate secondo UN38.3. Le carrozzine elettriche Eloflex soddisfano i requisiti applicabili dell'MDR 2017/745. La valutazione della conformità / marcatura CE di classe 1 è stata rilasciata in conformità con l'allegato VIII capitolo III dell'MDR 2017/745. Procedura di valutazione della conformità: allegato II e allegato III dell'MDR 2017/745. La marcatura CE sarà nulla se si utilizzano componenti o accessori sostitutivi non approvati per questo prodotto.

Esigenze

Lo scopo di una carrozzina elettronica Eloflex è compensare un infortunio o una disabilità, motivo per cui è consigliata nelle seguenti circostanze:

- Se l'utente ha l'incapacità di camminare o una capacità di camminare molto limitata, che rende difficile muoversi nella propria casa.
- Se c'è bisogno di uscire di casa per uscire o per visitare luoghi che vengono normalmente visitati per svolgere le faccende quotidiane.
- Quando l'utente ha difficoltà a raggiungere o svolgere lavori o attività a causa della sua disabilità motoria.

Si consiglia di utilizzare le carrozzine elettriche Eloflex sia all'interno che all'esterno, se non è possibile utilizzare carrozzine manuali a causa di problemi di mobilità, ma è comunque possibile gestire correttamente le carrozzine elettroniche.

Accessori

Caricabatteria e borsa con strumenti più semplici sono disponibili quando consegnati nella custodia sotto il sedile.

Utilità

Utilizzare la carrozzina elettrica Eloflex solo quando è completamente funzionante. Altrimenti metti a rischio te stesso e gli altri. Il seguente elenco non include tutte le possibili situazioni. Descrive solo alcune situazioni che possono influire sull'utilizzo della carrozzina elettrica.

- Non utilizzare la carrozzina elettrica se le batterie sono difettose o deformate
- Non utilizzare la carrozzina elettrica se il motore è a scatti o emette rumori anomali
- Non utilizzare la carrozzina elettrica se la funzione del freno sembra essere errata
- Se i pneumatici sono usurati, contattare il centro assistenza o il rivenditore
- Se si notano danni alla cintura di sicurezza, al bracciolo, al sedile, allo schienale, al joystick o ad altre parti della sedia, contattare il centro assistenza o il rivenditore.
- Se si notano danni all'impianto elettrico (cavi, batterie, caricabatteria, ecc.), contattare il proprio centro assistenza o rivenditore.

Garanzia del produttore

La garanzia Eloflex sostituisce le parti danneggiate; il danno non deve essere causato dall'utente. Le garanzie non coprono i danni causati da circostanze esterne quali furto, abuso, uso improprio, fulmini o modifiche.

Durata

La durata stimata di un Eloflex è di 5 anni. Tuttavia, la vita del prodotto è in gran parte influenzata dal modo in cui viene utilizzato e gestito. Un Eloflex può avere una vita molto più lunga se lo si prende cura di esso in modo corretto e lo si utilizza solo in linea con le informazioni contenute in questo documento.

Norme di sicurezza e rischi

SI PREGA DI LEGGERE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE ELOFLEX.




Chiusura

1. Metti la sedia pieghevole in posizione verticale e apri il poggiatesta. Immagine 1.
2. Afferra la maniglia sul retro dello schienale e tirala indietro. Allo stesso tempo, tieni fermo il sedile con una mano. Immagine 2.
3. Chiudi il gancio di bloccaggio. Immagine 3.
4. Apri i dispositivi di protezione premendo il pulsante e successivamente ruotandoli verso l'esterno. Immagine 4.
5. Regola i braccioli all'altezza desiderata. Immagine 5.



IMPORTANTE!
E' molto importante
che tu chiuda
il lucchetto prima
di utilizzare la sedia

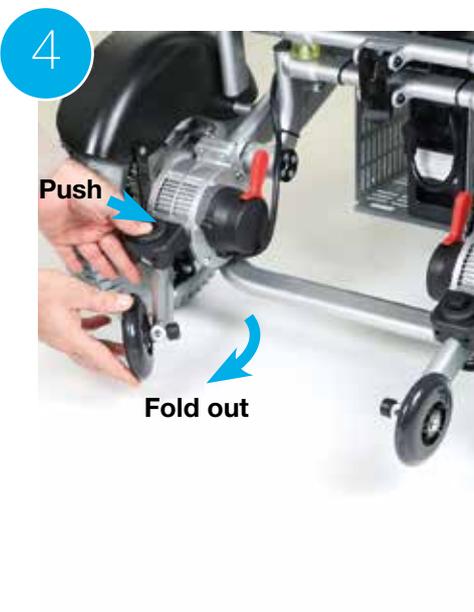


Ripiegamento

1. Abbassa i braccioli. Immagine 1.
2. Ripiega i copripunte premendo il pulsante e poi ruotali verso l'interno. Immagine 2.
3. Apri il fermo di blocco. Immagine 3.
4. Afferra la maniglia sul retro dello schienale e spingi in avanti. Tieni contemporaneamente la seduta con una mano. Immagine 4.
5. Ripiega il poggiatesta. Immagine 5.



Per ulteriori informazioni su come regolare i braccioli, consulta la pagina 8.

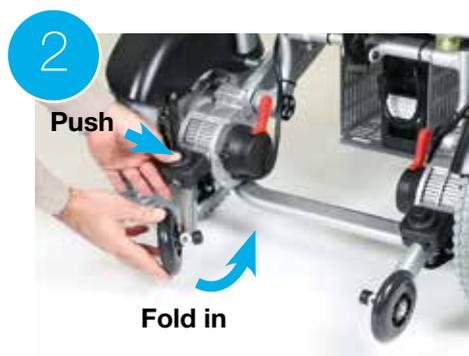

Installare il joystick


Passo 1

Montare il joystick nel tubo sotto il bracciolo e serrare la vite nella posizione desiderata.



Passo 2

Assemblare i connettori del cavo e ruotare delicatamente finché i perni non entrano nei fori e le scanalature nei due connettori si innestano. Quindi avvitare i manicotti su ciascun contatto.

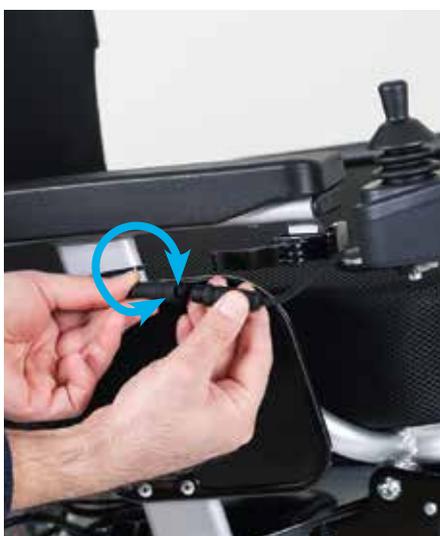

IMPORTANTE!
Fai attenzione a non farlo danneggiare o piegare il pin nel connettore.

Abbassare il joystick

Il supporto intelligente per joystick consente all'utente di abbassare rapidamente il joystick senza rimuoverlo. Ciò significa che ti avvicini al bordo del tavolo, il che offre una posizione seduta migliore.

1. Sollevare la leva di blocco per rilasciare il joystick.
2. Tirare delicatamente il joystick in avanti. Quindi lascia che il joystick penda verso il basso.



Istruzioni per la ricarica

Modalità di ricarica

Come prima cosa, spegnere la carrozzina Eloflex (tutte le spie del joystick devono essere spente). Collegare il caricabatterie alla presa sulla parte anteriore del joystick. Assicurarsi che le posizioni dei contatti combacino. Quindi collegare il cavo di alimentazione del caricabatterie a una presa di corrente.

La carica è indicata da una spia sul caricatore. La spia rossa indica che la carica è in corso. Dopo circa tre ore, le batterie sono cariche al 90%. La carrozzina può essere nuovamente utilizzata.

Dopo circa 5-8 ore, la spia del caricatore diventa verde e le batterie sono completamente cariche. Durante la carica, il caricabatterie stesso si riscalda: questo è normale. Le istruzioni di ricarica devono essere eseguite per circa cinque ore nel caso in cui la barra dell'indicatore della batteria sul joystick sia scesa di tre linee.

Le batterie non vengono danneggiate dalle cariche di mantenimento, ma per una durata massima si consiglia di scollegare il caricabatterie quando le



batterie sono completamente cariche. La ricarica delle batterie può essere eseguita fino a una temperatura di -10 gradi. Quando la carica avviene a temperature inferiori, le batterie non si caricano completamente. Se la carrozzina Eloflex viene utilizzata a temperature inferiori, la resa chilometrica ne risente. Ad esempio, a -10 gradi, il chilometraggio può essere ridotto fino al 50%.



IMPORTANTE!
MAI connettersi
direttamente il
caricabatterie
alla batteria.

Guida manuale

Spegnere la carrozzina elettronica con il joystick. Quindi spingere le leve rosse sui motori (vedi foto) per scollegare i freni magnetici. In questa posizione, la sedia può essere ruotata manualmente.


Nota! Se l'utente utilizza la sedia senza assistenza, la chiusura magnetica della sedia deve essere sempre inserita.



Regolare i braccioli

Per un comfort di seduta ottimale, è possibile regolare l'altezza dei braccioli.

1. Rilasciare prima il blocco sollevando la leva di blocco.
2. Quindi alzare o abbassare i braccioli all'altezza desiderata.
3. Abbassare la leva di bloccaggio.

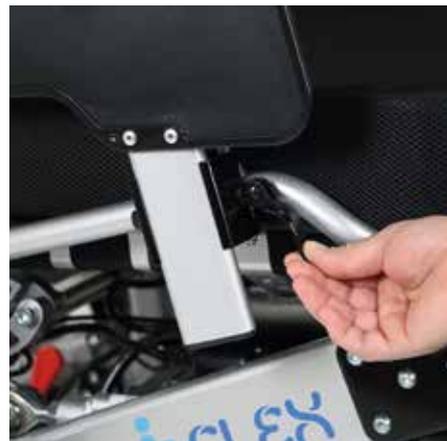

SUGGERIMENTI!
È anche possibile rimuovere completamente i braccioli per una salita e discesa più facile.

Poggiapiedi

Per facilitare l'ingresso e l'uscita, il poggiapiedi può essere ripiegato come mostrato di seguito.



Maniglia di guida

La maniglia di guida viene utilizzata per spostare manualmente la sedia a rotelle. La maniglia di guida può essere ripiegata quando non è in uso.



Dispositivo antiribaltamento

Puoi ripiegare i copripunta quando pieghi la sedia e durante il trasporto.

1. Premi il pulsante
2. Ripiega il copripunta.

NOTA! I dispositivi antiribaltamento devono essere sempre estesi durante l'utilizzo della sedia



Cintura di sicurezza

Per una guida sicura, raccomandiamo di utilizzare sempre la cintura di sicurezza quando si guida la sedia.



Regolazione del supporto lombare

Il modello H è dotato di un comodo supporto lombare per un comfort ottimale durante la seduta. Per regolare il supporto lombare, segui questi passaggi.

- 1.** Solleva la fodera posteriore.
- 2.** Allenta o stringi il supporto lombare utilizzando la chiusura in velcro fino a ottenere il supporto desiderato.
- 3.** Se non desideri alcun supporto lombare, puoi rimuovere l'intero supporto lombare.



Regolare lo schienale

Ripiegare il bordo della schiena tirandolo. Stringere le cinghie in velcro per una comoda posizione di seduta.

Quindi piegare il rivestimento verso il basso e premere leggermente in modo che si incastrino nelle strisce di velcro.



Regolazione del meccanismo di bloccaggio

È importante che il meccanismo di bloccaggio sulla tua Eloflex scorra lentamente su e giù. Deve scorrere così lentamente da poter rimanere in posizione verticale da solo. Questo è importante affinché il meccanismo di bloccaggio rimanga nella sua posizione bloccata anche quando le molle vengono compresse.

Per rendere il meccanismo di bloccaggio più lento, è sufficiente stringere la staffa con le due viti esagonali che tengono il meccanismo di bloccaggio in posizione.



È importante che il meccanismo di bloccaggio scorra lentamente su e giù in modo da evitare che si apra quando si utilizza la sedia.

Trasporto e conservazione

- Per sollevare la sedia, si consiglia di piegare prima la sedia.
- Una sedia piegata può essere messa nel bagaglio di un'auto o nell'armadio.
- Se la sedia non viene utilizzata per un po', si consiglia di caricare completamente le batterie prima di mettere da parte la sedia.
- La sedia deve essere conservata al chiuso, in luoghi al riparo dal gelo, asciutti e ventilati. Temperatura di conservazione 0-30 gradi.
- In caso di trasporto in autobus o con mezzi di trasporto per disabili, Eloflex deve essere fissato ai punti di fissaggio indicati nelle immagini in basso. Si noti che Eloflex non è testato come seggiolino auto. Raccomandiamo quindi sempre che l'utente si avvicini ai sedili della vettura.



- In caso di trasporto aereo, verificare con la propria compagnia aerea. Eloflex segue le raccomandazioni di IATA.

Joystick



1 2 3

Connettore USB

TIP:
Mettere il connettore USB nella parte inferiore del joystick per caricare il telefono cellulare.



1 Indicatore di velocità:

Tutte le barre bianche = velocità massima.

2 Contachilometri:


Mostra la distanza percorsa e la velocità attuale.

3 Controllo batteria:

Viene indicata la quantità di energia residua nelle batterie. Quando le batterie sono completamente cariche, tutte le barre sono bianche. Quando le batterie si scaricano, le barre si spengono a loro volta. Ricaricare quando si sono esaurite tre barre.



Joystick: controlla la velocità e la direzione della sedia

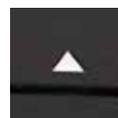

Aumenta velocità: Premere per aumentare la velocità massima della carrozzina. Tenere premuto per alzare il sedile della sedia.



Accensione e spegnimento: premere per accendere e spegnere Eloflex.



Diminuire la velocità: Premere per ridurre la velocità massima della carrozzina. Tenere premuto per abbassare il sedile della sedia.

Clacson: premere per richiamare l'attenzione.

Luce accesa/spenta: premere per accendere o spegnere la luce.

Naviga nei menu


Cambia impostazioni

È possibile modificare le impostazioni della carrozzina, come la lingua, il volume dell'avvisatore acustico e le unità di misura.


1. Per accedere alle impostazioni, premere il tasto multifunzione destro. Si aprirà un elenco di opzioni a scelta multipla.



2. Nell'elenco a scelta multipla, scorrere verso l'alto e verso il basso con i pulsanti di velocità.

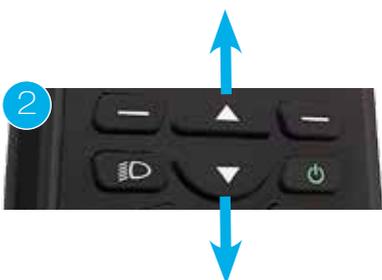

3. Selezionare la funzione con il tasto multifunzione destro (Enter) o tornare indietro di uno con il tasto multifunzione sinistro (Return).

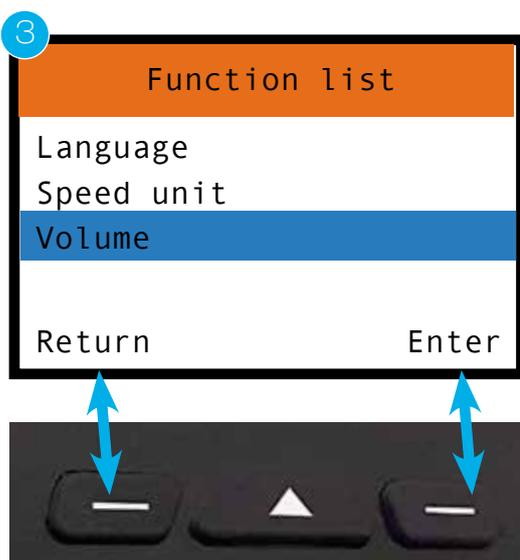

Istruzioni di sicurezza durante la guida

Rischio di lesioni in caso di ribaltamento della carrozzina.

- Guidare solo su pendenze che non superano la pendenza massima consentita
- Utilizzare sempre dispositivi antiribaltamento quando si viaggia con Eloflex
- La guida in discesa deve essere sempre eseguita a velocità inferiore
- Evitare le aree in cui esiste il rischio di superfici ghiacciate o scivolose
- Non tentare mai di salire o scendere le scale con la carrozzina elettrica
- Non superare mai ostacoli superiori all'altezza massima consigliata
- Evitare movimenti bruschi con il joystick e cambi di direzione improvvisi durante la guida

Rischio di rimanere bloccati in luoghi remoti.

- Un utente con mobilità notevolmente ridotta non dovrebbe percorrere lunghe distanze all'aperto da solo

Pericolo di lesioni se un piede scivola dal poggiatesta e cade sotto la carrozzina elettrica durante la guida.

- Mettere sempre i piedi al centro del poggiatesta durante la guida

Rischio di lesioni in caso di collisione con altri oggetti in passaggi stretti.

- Guidare attraverso passaggi stretti con la minima velocità e la massima attenzione

Esiste il rischio che la carrozzina si ribalti se l'antiribaltamento i dispositivi vengono rimossi, danneggiati o montati in una posizione che si discosta dal montaggio standard.

- I dispositivi antiribaltamento devono essere sempre montati quando si utilizza la carrozzina elettrica
- I dispositivi antiribaltamento funzionano solo su una superficie solida. Su superfici morbide come prati e neve, il dispositivo antiribaltamento può perdere il suo effetto. Pertanto, guidare con estrema cautela su superfici morbide.



Leggi

L'utente deve leggere queste istruzioni di sicurezza e di guida prima di utilizzare la carrozzina elettronica Eloflex.

Fai pratica

La pratica rende perfetti. Allenati a guidare la tua Eloflex insieme a un assistente partendo da una superficie preferibilmente all'aperto, prima di utilizzare la tua carrozzina elettronica tra altre persone, in negozi o ristoranti, ecc. Spostarsi in avanti spostando lentamente il joystick in avanti. Fermarsi rilasciando il joystick.

Inversione

Fare inversione spostando lentamente il joystick all'indietro. Per interrompere, rilasciare il joystick. Ricordati di guardare sempre indietro prima di iniziare a fare retromarcia per essere sicuro che nessuna persona o cosa sia d'intralcio.

Girare

Girare spostando leggermente il joystick lateralmente. Fai attenzione in modo che nulla ostacoli i lati quando giri.

Svoltare

Svoltare durante la guida spostando delicatamente il joystick lateralmente nella stessa direzione in cui si desidera svoltare. Ridurre sempre la velocità durante la svolta.

Ostacoli

Esercitati ad evitare e superare gli ostacoli. Spostare il joystick lateralmente durante la guida in avanti per evitare gli ostacoli. Ricorda di ridurre la velocità quando ti avvicini agli ostacoli.

Guida veloce

Premi il joystick in avanti se vuoi guidare velocemente. Ricordati di ritrarre il joystick e ridurre la velocità non appena ti senti insicuro, sia che tu stia girando o ti stia avvicinando a un ostacolo.

Superare gli ostacoli

Guidare lentamente verso l'ostacolo e assicurarsi che le ruote anteriori siano nella direzione di marcia. Quindi sposta lentamente il joystick in avanti mentre ti inclini all'indietro per superare l'ostacolo. Eloflex è testato e approvato per ostacoli fino ad un massimo di 6 cm.

Correre in pendenza

Prova a guidare verso l'alto o verso il basso per una superficie inclinata. Inclinati leggermente in avanti mentre guidi e all'indietro mentre scendi, per mantenere il centro di gravità. Se possibile, evitare di guidare lateralmente e compensare l'eventuale pendenza laterale piegandosi nella direzione opposta. Guidare sempre lentamente sui pendii. Evita le superfici che si inclinano di più di 9 gradi.

Ascensori

Ricordati di controllare la larghezza della porta dell'ascensore e la velocità di chiusura della porta prima di entrare nell'ascensore. Tieni presente che potresti dover uscire dall'ascensore se non è abbastanza grande da consentirti di girarti.

Guida su strada

Guida principalmente su marciapiedi, passerelle e piste ciclabili e, infine, su strade trafficate con la tua Eloflex.

Attraversare la carreggiata

Se possibile, scegli sempre di attraversare la strada a un passaggio pedonale. Prestare attenzione alle auto che si incrociano. Se disponibile, utilizzare la parte smussata della pavimentazione. Evitare cordoli alti più di 6 cm.

Istruzioni generali di sicurezza

Esiste il rischio di lesioni personali se la carrozzina elettrica viene utilizzata per scopi diversi da quelli descritti in questo documento.

- Utilizzare la carrozzina elettrica solo secondo le istruzioni di questo manuale (vedi sopra, paragrafo "Classificazione e uso previsto")

Esiste il rischio di lesioni personali se la carrozzina elettrica viene utilizzata per una ridotta capacità di guida.

- Non utilizzare la sedia a rotelle quando le proprie capacità di guida sono ridotte a causa, ad esempio, di malattie, farmaci o alcol.

Esiste il rischio di lesioni se la carrozzina elettrica viene spostata involontariamente.

- Spegnerla prima di salire e scendere o se c'è il rischio che tu, un'altra persona o un oggetto possa entrare in contatto con il joystick.
- Quando i motori sono disinnestati, i freni non funzionano. Pertanto, la carrozzina deve essere spinta solo su un terreno pianeggiante, mai in pendenza. Non lasciare mai la carrozzina su o vicino a pendii con i motori disinseriti.

Esiste il rischio di lesioni personali se la carrozzina elettrica viene spenta durante il viaggio, ad esempio con il pulsante di accensione/spegnimento o strappando un cavo, poiché si ferma con uno strattone.

- Rilasciare il joystick in caso di frenata di emergenza. Quindi la carrozzina si ferma automaticamente.

Esiste il rischio di lesioni dovute a cadute dalla sedia a rotelle

- Non avanzare, non piegarsi in avanti tra le ginocchia e non sporgersi oltre il bordo della carrozzina, ad esempio per raggiungere oggetti.
- Utilizzare sempre una cintura di sicurezza e regolarla di nuovo prima di ogni viaggio.
- Guidare il più vicino possibile al nuovo posto durante il trasferimento su un altro posto.

In caso di superamento del carico massimo consentito sussiste il rischio di lesioni personali.

- Rispettare il carico massimo ammesso (vedi paragrafo "Dati tecnici" sul retro di questo documento).
- La carrozzina elettronica può essere utilizzata da una sola persona. Non utilizzare mai la carrozzina per trasportare più di una persona alla volta.

Vi è il rischio di lesioni personali e danni alla carrozzina se il blocco viene rilasciato quando la piegatura non è bloccata correttamente quando si utilizza la carrozzina elettrica.

- Se il blocco della carrozzina elettrica non è scattato in posizione correttamente, la carrozzina può crollare improvvisamente durante l'uso, causando la caduta dalla carrozzina.
- Assicurarsi sempre che il gancio di bloccaggio sia in una posizione corretta prima di utilizzare la carrozzina elettrica.
- Piegare e sollevare sempre la carrozzina elettrica come descritto nelle istruzioni per l'uso.
- Prestare attenzione in modo che niente o niente venga schiacciato durante la piegatura e l'apertura.

In caso di utilizzo in ambienti umidi, sussiste il rischio di lesioni personali e danni alla carrozzina.

- La carrozzina elettrica non deve essere utilizzata durante la doccia.
- La carrozzina elettrica non deve essere utilizzata durante il bagno.



Attraversamento binari ferroviari

Attraversare sempre il binario ferroviario dritto di fronte, mai obliquamente di lato. Non attraversare mai i binari della ferrovia da solo, porta sempre con te qualcuno che possa aiutarti.

Pendii ripidi

Prestare attenzione durante la guida su pendii ripidi, poiché la sedia potrebbe rompersi. Eloflex è testato e approvato per pendenze con un massimo di 9 gradi. Avere sempre qualcuno con te che può aiutarti.

Scalini alti

Fare attenzione quando si sale o si esce per un bordo. Eloflex è testato e approvato per scalini fino ad un massimo di 6 cm. Avere sempre qualcuno con te che può aiutarti.

Trasferimento

Ti consigliamo di avere sempre qualcuno che possa aiutarti con i trasferimenti da e verso il tuo Eloflex. Spegnerne sempre l'alimentazione prima di iniziare il movimento. Sollevare sempre i braccioli e il poggiatesta prima di spostarsi per facilitare la salita e la discesa dalla sedia.

Non effettuare autonomamente riparazioni

Non tentare mai di riparare da solo una carrozzina elettronica rotta. Se provi a riparare la sedia da solo, la garanzia non si applica. Rivolgerti sempre a Eloflex o al negozio o al centro assistenza che ha venduto/prescritto la sedia. Non modificare mai la tua carrozzina elettronica da solo.

Non è un giocattolo

Non consentire mai a bambini che normalmente non utilizzano una carrozzina elettronica di sedersi o utilizzare Eloflex.

Pulizia

Non pulire mai Eloflex con acqua corrente. Puliscila solo con un panno umido. Se la tua Eloflex è lenta a piegarsi e ad unirsi, puoi lubrificare gli snodi con olio o spray al silicone.

Attenti al caldo

Non lasciare mai Eloflex alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore poiché le batterie potrebbero danneggiarsi. Non avvicinarti mai ad una fiamma viva con il tuo Eloflex. Puoi usare il tuo Eloflex da -10 gradi fino a +45 gradi. A temperature di congelamento, la durata può essere influenzata.

Conservazione

Tenere Eloflex fuori dalla portata dei bambini quando non è in uso. La sedia deve essere conservata al chiuso in aree al riparo dal gelo, asciutte e ventilate. Temperatura di conservazione 0-30 gradi.

Il caricabatteria

Il caricabatteria non deve mai essere coperto quando viene utilizzato per caricare Eloflex. Il caricabatteria si surriscalda e sussiste il rischio di incidenti o lesioni.

Batterie

Non conservare mai le batterie alla luce diretta del sole o in un luogo che può raggiungere temperature inferiori allo zero. Le batterie devono essere conservate in un luogo asciutto e ventilato.

Specifiche tecniche

MODELLO H

Peso	43 kg senza batterie
Peso totale	49,5 kg comprese le batterie
Autonomia	40 km
Carico massimo	200 kg
Velocità	8 km/h
Motore	2 x motori senza spazzole
Potenza motore	2 x 400 Watt
Batteria	2 x Litium ION 20AH/24V
Potenza batterie	2 x 480 Wh
Tempo di ricarica	3 ore
Raggio di sterzata	99 cm
Ruote	Anterior 9" aria, posteriori 13" aria
Altezza del sedile	54 cm
Larghezza del sedile	51 (56, 61) cm
Profondità sedile	51 cm
Schienale	Regolabile
Dimensioni	103x66x115 cm
Dimensioni carrozzina chiusa	83x66x45 cm

© Copyright Eloflex

Questo documento contiene informazioni protette da copyright e non può essere copiato o riprodotto in tutto o in parte senza il permesso scritto di Eloflex. Eloflex è riservato per eventuali errori tipografici in questo documento e ci riserviamo il diritto di modifiche al prodotto.

Contattare Eloflex

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contattare il centro di assistenza o il rivenditore. Se si desidera un contatto diretto, le informazioni di contatto sono disponibili sul nostro sito web, www.eloflex.it.



2021-05-08

Version 2.0

Sungo Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE

Amsterdam, Netherlands

SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd

No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu



Eloflex

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna

SWEDEN