

INSTRUCTION MANUAL

ELOFLEX R

BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING

OHJEKIRJA

MANUALE DI ISTRUZIONI

HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MANUEL DE L'UTILISATEUR



ELOFLEX

Üdvözöljük az Ön Eloflexében

Köszönjük, hogy az Eloflexet választotta elektromos kerekesszékének. Örülünk, hogy az Eloflex mellett döntött, hiszen küldetésünk a mindennapi élet egyszerűsítése és a mobilitási kihívásokkal küzdő emberek szabadságának növelése. Reméljük, hogy az Eloflex lehetővé teszi Önnek, hogy mindkét előnyt élvezze.

Az új elektromos kerekesszékének használata kifizetődő élmény kell, hogy legyen. Ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz a biztonságról, a használatról és a karbantartásról. Erősen javasoljuk, hogy az Eloflex első használatba vétele előtt olvassa át a teljes dokumentumot. Azt is tanácsos, hogy mielőtt más környezetbe merészkedne, gyakorolja az Eloflex működtetését egy csendes, nyitott és vízszintes helyen.

Azért vagyunk itt, hogy támogassuk Önt az Eloflex használatának megkezdésében. Ha bármilyen kérdése van, vagy segítségre van szüksége, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

**Sok szerencsét és nagy örömet kívánunk az Eloflex készülékével.
Vezessen óvatosan!**

Tartalom

Rendeltetésszerű használat	3
Kibontás és összehajtás	4
Anti-tip eszköz	4
Töltési utasítások	5
Telepítse a joystickot	5
A joystick használata	6
További funkciók	7
Kézi vezetés	7
Lábtartó	8
Háttámla	8
Emelje fel a kartámaszokat	9
Szállítás és tárolás	9
Vezetés	10
Biztonság	11
Műszaki specifikációk	12
Kapcsolat	12

Oldal

3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
10
11
12
12



Rendeltetészerű használat

Osztályozás és rendeltetészerű használat

Az Eloflex elektromos kerekesszékeket olyan emberek számára fejlesztették ki, akik nehezen vagy egyáltalán nem tudnak járnival, de rendelkeznek a látásukkal, fizikai és szellemi képességükkel ahhoz, hogy egy elektromos kerekesszékkel irányítsanak.

Az Eloflex elektromos kerekesszék kelően kompakt és rugalmas beltéri használatra, de kültéri használatra is alkalmas. A "Műszaki adatok" című fejezet a dokumentum hátoldalán a sebességre, a fordulási sugárra, a hatótávolságra, a maximális emelőkapacitásra, a maximális felhasználói súlyra stb. vonatkozó információkat tartalmazza.

Az Eloflex az EN12184:2014 - B osztály (beltéri és kültéri használat) szerint tesztelt és jóváhagyott. Az Eloflex az ISO-7176 és az IEC60601 szabványok szerint is jóváhagyott, az akkumulátorok pedig az UN38.3 szabvány szerint engedélyezettek.

Az Eloflex elektromos kerekesszékek megfelelnek az MDR 2017/745 vonatkozó követelményeinek.

Az MDR 2017/745 19. cikkével, valamint II. és III. mellékletével összhangban kiadták az MDR 1. osztályú megfelelőségértékelést/CE-jelölést. A CE-jelölés érvényét veszti, ha olyan cserealkatrészeket vagy tartozékokat használ, amelyeket nem hagytak jóvá ehhez a termékhez.

Szükség van a címre.

Az Eloflex elektromos kerekesszék célja a sérülés vagy fogyatékosság kompenzálása, és az alábbi esetekben ajánlott:

- Ha a felhasználó nem tud járnival, vagy nagyon korlátozottan képes járnival, ami megnehezíti a saját otthonában való mozgást.
- Ha ki kell hagyni az otthon, hogy kimozduljon, vagy a mindennapi ügyek intézéséhez rendszeresen látogatott helyekre menjen.
- Ha a felhasználónak a mozgáskorlátozottsága miatt nehézséget okoz a munka vagy a tevékenységek elérése vagy elvégzése.

Az Eloflex elektromos kerekesszékek használata mind a beltéren, mind a szabadban ajánlott, ha a kézzel működtetett kerekesszékek használata a mozgáskorlátozottság miatt nem lehetséges, de az elektromos kerekesszékek megfelelő kezelése még lehetséges.

Tartozékok

A töltő, a fényvisszaverők és egy egyszerű szerszámokat tartalmazó táskával az ülés alatti tárolótáskában található a szállításkor.

Hasznossági eszközök

Az Eloflex elektromos kerekesszék csak akkor használja, ha az teljesen működőképes; ellenkező esetben saját magát és másokat is veszélynek teszi ki. Az alábbi lista nem tartalmaz minden lehetséges helyzetet, de leír bizonyos körülményeket, amelyek befolyásolhatják a motoros kerekesszék használhatóságát:

- Ne használja a motoros kerekesszék, ha az akkumulátorok hibásak vagy deformáltak.
- Ne használja a motoros kerekesszék, ha a motor rángatózik vagy rendellenes hangokat ad ki.
- Ne használja a motoros kerekesszék, ha a fékfunkció hibásnak tűnik.
- Ha a gumibroncsok elhasználódtak, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz vagy a kereskedőhöz.
- Ha a biztonsági öv, a kartámasz, az ülés, a háttámla, a joystick vagy a szék egyéb részeinek sérülését észleli, forduljon segítségnyújtó központjához vagy kereskedőjéhez.
- Ha bármilyen sérülést észlel az elektromos rendszerben (kábelek, akkumulátorok, töltők stb.), forduljon assistance központjához vagy kereskedőjéhez.

Gyártói garancia

Az Eloflex garanciája kiterjed a törött alkatrészek cseréjére, feltéve, hogy a sérülést nem a felhasználó okozta. A garancia nem terjed ki a külső körülményekből, például lopásból, visszaélésből, helytelen használatból, villámcsapásból vagy módosításból eredő károokra.

Élettartam

Az Eloflex becsült élettartama 5 év. A termék élettartamát azonban nagyban befolyásolja a használat és a karbantartás módja. Az Eloflex sokkal hosszabb élettartamú lehet, ha jól gondozzák és a jelen dokumentumban megadott információknak megfelelően használják.

Biztonsági előírások és kockázatok


A FELHASZNÁLÓNAK AZ ELOFLEX KERKESSZÉK HASZNÁLATA ELŐTT EL KELL OLVASNIA A JELEN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI ÉS VEZETÉSI UTASÍTÁSOKAT.

Kibontás és összehajtás

Kihajtogatás

Lépés 1

Helyezze az összehajtogatott széket a földre a jobb oldali képen látható módon. Nyissa ki a háttámla hátoldalán található szállítási zárat. Fogja meg a háttámlát, és húzza felfelé a szék kinyitásához. A másik kezével nyomja lefelé az ülést, amíg egy egyértelmű „kattanást” nem hall, ami azt jelzi, hogy a biztonsági zár be van kapcsolva.

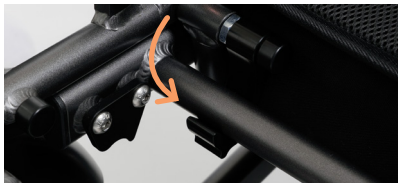

Lépés 2

Fontos! Győződjön meg róla, hogy a reteszelő retesz teljesen zárva van, hogy a széket kibontott helyzetben rögzítse.



Használat előtt ellenőrizze a zárat.

Összecsukható

Lépés 1

Nyomja meg a piros gombot a fő reteszelő retesz kioldásához a képen látható módon.


Lépés 2

Tegye egyik kezét az ülés párná elé. A másik kezével fogja meg a háttámla felső részét, és hajtsa előre. Nyomja össze a széket a képen látható módon.

Csípőpontok! Legyen óvatos a hajtogatáskor.

Lépés 3

A praktikus szállítási zár bekapcsolható, hogy a kerekesszéket összehajtogatott helyzetben tartsa. Forgassa el a szállítási zárat, amíg a szemben lévő rudat rögzíti.

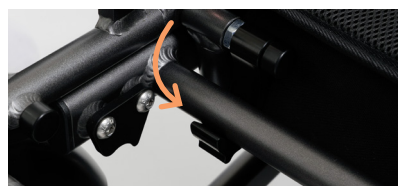

Anti-tip eszköz

Csúsztassa el a piros gombot, és hajtsa felfelé a csúszásgátlót, hogy visszahúzza azt. A felborulásgátlót nem kell beállítani, de egyes modelleknél a szállításhoz be lehet húzni. A kerekesszéket nem szabad a felborulásgátló aktív állapotában használni, mivel ez súlyos sérülésveszélyt jelent. Minden használat előtt ellenőrizze azt.



Sérülésveszély!
Mindig győződjön meg arról, hogy a billenés gátló aktív.

Töltési utasítások

Mielőtt elkezdené

Az Eloflexet a kézbesítéskor töltsse fel. Csak az Eloflex készülékhez mellékelt eredeti töltőt használja.

A töltő csak a joystickhoz csatlakoztatható, közvetlenül az akkumulátorokhoz nem.

Legalább 3 havonta töltsse fel az akkumulátort, hogy elkerülje az akkumulátorok maradandó károsodását.

Hogyan kell tölteni

Törekedjen arra, hogy az Eloflexet minden egyes utazás után, vagy amikor a joystickon lévő akkumulátorjelző három vonalat csökken. Kezdje az Eloflex kikapcsolásával (a joystick minden lámpájának ki kell aludnia).

Csatlakoztassa a töltőt a joystick elején lévő aljzathoz. Győződjön meg róla, hogy az érintkezők egyeznek.

Csatlakoztassa a töltő tápkábelét egy konnektorba. A töltést a töltőn lévő

lámpa jelzi. A piros fény azt jelenti, hogy a töltés folyamatban van. Körülbelül három óra elteltével az akkumulátorok 90 százalékban feltöltődtek, és a szék használható.

Körülbelül 5-8 óra elteltével a töltő lámpája zöldre vált, ami azt jelzi, hogy az akkumulátorok teljesen feltöltődtek. Töltés közben a töltő felmelegszik, ami normális.

A töltés befejeztével mindig húzza ki a töltőt mind a konnektorból, mind a kerekesszékből. Soha ne töltsse felügyelet nélkül. Az akkumulátorok 0 fokig tölthetők. Alacsonyabb hőmérsékleten történő töltéskor előfordulhat, hogy az akkumulátorok nem töltődnek fel teljesen.

Ha az Eloflexet fagypont alatti hőmérsékleten használja, az befolyásolja a hatótávolságot.



Az akkumulátorok rendszeres töltésének elmulasztása maradandó károsodást okozhat



Például -10 fokon a hatótávolság akár 50%-kal is csökkenhet.

Hosszú távú tárolás

Az akkumulátorok tartósan károsodhatnak, ha a feszültség túlságosan lecsökken.

Javasoljuk az akkumulátorok leválasztását a kisülés minimalizálása érdekében, és rendszeres (legalább 3 havonta egyszeri) újratöltését. Soha ne hagyja a töltőt állandóan csatlakoztatva.

Telepítse a joystickot

Lépés 1

Beszerezze a joystickot a gyorsárnak a karfára történő összeszerelésével úgy, hogy a retesz kifelé nézzen. Állítsa be az anyát úgy, hogy a retesz teljesen zárható legyen, de a joystickot mégis biztonságosan a helyén tartsa. A joystick jobb vagy bal oldalra szerelhető.




Lépés 2

Kapcsolja össze a kábelcsatlakozókat, és óvatosan csavarja őket, amíg a csapok a lyukakba nem illeszkednek, és a két csatlakozó homyai nem illeszkednek egymáshoz. Ezután csavarja biztonságosan a hüvelyeket mindkét csatlakozási pontra.



Kérjük, ügyeljen arra, hogy a csatlakozóban lévő csapok ne sérüljenek meg, illetve ne hajlítsák el.

A joystick használata

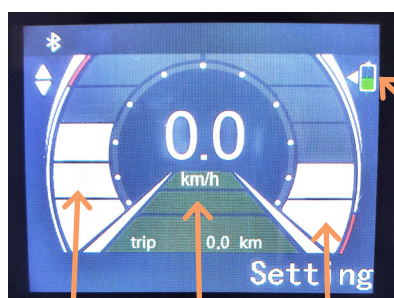

1

2

3

4

1 Sebességmérő: Megjeleníti az aktuális sebességet.

2 Sebesség beállítása: Megmutatja a megtett távolságot és az aktuális sebességet.

3 Trip/ODO-mérő: A legutóbbi bekapcsolás óta megtett távolságot (utazás) vagy a jármű teljes távolságát (ODO) mutatja.

4 Az akkumulátor töltöttségi szintje: Az akkumulátorok maradék energiáját jelzi. Teljesen feltöltött állapotban minden sáv fehér színű. A feltöltés akkor ajánlott, ha már három sáv elhasználódott.

USB-csatlakozó

TIPP: Használja a joystick alatt található USB-csatlakozót mobiltelefonja töltéséhez.




Töltő bemenete

Fény



Joystick: A szék sebességét és irányát vezéri.

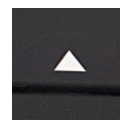

Növelje a sebességet: Nyomja meg, hogy a szék gyorsabban menjen.



Be- és kikapcsolás: Nyomja meg az Eloflex be- vagy kikapcsolásához.



Sebesség csökkentése: Nyomja meg, hogy a szék lassabban menjen.



Kürt: Nyomja meg a figyelemfelhívó hangjelzéshez.



Fény be/ki kapcsolása: Nyomja meg a lámpa be- vagy kikapcsolásához.

További funkciók


Beállítások módosítása

Módosíthatja a szék beállításait, beleértve a nyelvet, a kürt hangerejét és a mértékegységeket.


1. A beállítások eléréséhez nyomja meg a jobb oldali multifunkciós gombot. Ekkor megjelenik a lehetőségek listája.



2. A gyorsgombokkal görgessen felfelé és lefelé az opciók listáján.

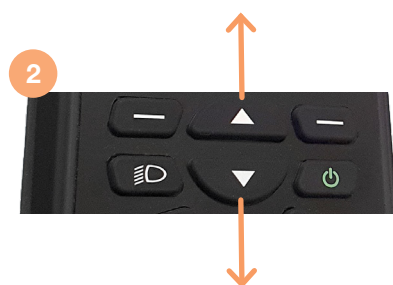

3. Válasszon ki egy funkciót a jobb oldali többfunkciós gomb megnyomásával (Enter), vagy lépjen vissza egy lépést a bal oldali többfunkciós gomb megnyomásával (Return).

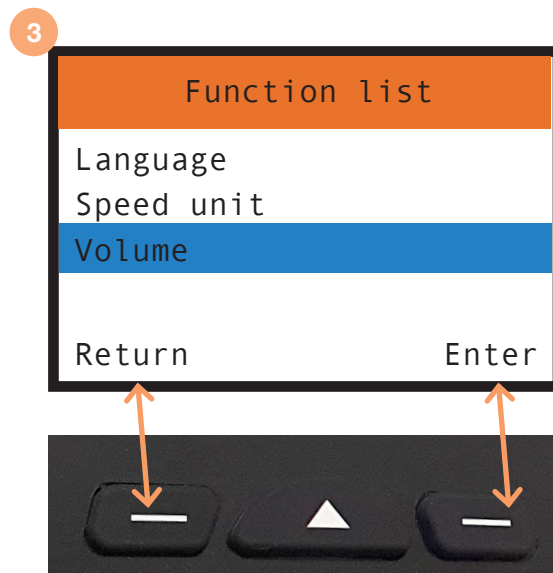

Zár / gyermekbiztonság

Az Eloflex elektronikusan lezárható a fel és le nyilak egyidejű, 3 másodpercig tartó nyomva tartásával. A kijelző tetején egy kis szimbólum jelzi, hogy a zár aktiválva van. (A joysticknak be kell lennie kapcsolva a lezáráshoz/feloldáshoz).

USB töltőport

Az USB-porton keresztül mobiltelefonok, iPadek és más hordozható eszközök tölthetők. 5V-os áramot szolgáltat, a csatlakoztatott eszköz által meghatározott töltési árammal, maxi-

mum 2,1A-ig.

Figyelmeztetések

A kijelző képes hibakódok megjelenítésére a hibák jelzésére. Az 1-es és 2-es hibakódok azt jelzik, hogy a mágneses fékek aktívak.

Távvezérlés alkalmazáson keresztül

Az Eloflex kerekesszékek egy alkalmazáson keresztül is vezérelhetők. Használja az alábbi QR-kódokat a letöltéshez. Szükség esetén forduljon a márkake-

reskedőhöz a részletes utasításokért. MEGJEGYZÉS: Az alkalmazásvezérlés nem használható segédvezérlő eszközként (pl. amikor egy személy ül a székben).



Kézi vezetés

Kapcsolja ki a kerekesszéket a joystickkal. Ezután nyomja meg a motoron lévő piros karokat (lásd a képet) a mágneses fékek kikapcsolásához. Ebben a helyzetben a széket kézzel lehet gurítani.

Megjegyzés! Ha a felhasználó segítség nélkül használja a széket, a szék mágneses reteszelésének mindig be kell lennie kapcsolva.



Ne nyomja a piros karokat a lábával, csak a kezét használja.

Lábtartó


A könnyebb be- és kiszállás érdekében a lábtartó fel- és behajtható az alábbi ábrán látható módon.



A lábtartó beállítása

A lábtartó függőlegesen és vízszintesen is állítható fix pozícióban. Lazítsa meg a csavart, mozgassa a lábtartót a kívánt pozícióba, majd óvatosan húzza meg a csavart, ügyelve arra, hogy az egy vonalban legyen a menetes furattal. Húzza meg a csavart.

Ha a lábtartó nem marad a felemelt helyzetben, a rögzítőcsavarok meghúzásával beállíthatja a lábtartó tehetetlenségét.

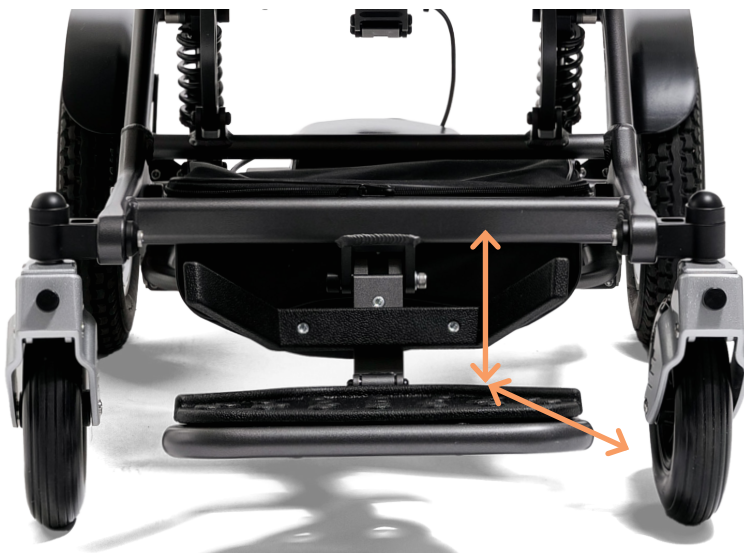

Háttámla

A háttámla beállítása

Állítsa be a háttámla dőlésszögét az oldalsó karok lenyomásával, és állítsa a háttámlát olyan szögben, amely kényelmesnek tűnik. Ezután engedje el a karokat a pozíció rögzítéséhez. 8-30 fokos dőlésszög között választhat.



Emelje fel a kartámaszokat

A kartámasz felemeléséhez egyszerűen nyomja meg a kartámasz alatti kis piros kioldókart. A kartámasz automatikusan visszazáródik, amikor lehajtja.



Szállítás és tárolás

- A szék felemeléséhez ajánlatos először laposra hajtogatni, majd felemelni függőleges helyzetbe, mielőtt végül felemelné.
- Az összehajtogatott széket az autó csomagtartójába lehet tenni, vagy a szekrénybe lehet állítani.
- Szállításkor hajtja le vagy vegye ki a joysticket.
- Ha a széket egy ideig nem kívánja használni, gondoskodjon a megfelelő tárolásáról és az akkumulátorok rendszeres feltöltéséről a "Hogyan kell tölteni" című fejezet szerint. Ellenkező esetben a szék használhatatlanná válhat.
- A széket fagymentes, száraz és szellőztetett helyen, zárt térben kell tárolni. Tárolási hőmérséklet 0-30 fok.
- A párnahuzatok levehetőek és 40°C-on moshatók.

- Busszal vagy mozgássérült-szállítóval történő szállítás esetén az Eloflexet az alul látható képeken látható rögzítési pontokhoz kell rögzíteni. **Megjegyzés! Az Eloflex nem tesztelt és nem engedélyezett autósülésként. Ezért nem szabad az Eloflexben ülni az autós szállítás során.**
- Repülővel történő szállítás esetén kérjük, hogy a foglalás és a bejelentkezés előtt egyeztessen a légitársasággal. Az Eloflex az IATA ajánlását követi.



Vezetés

Olvassa el

A felhasználónak az Eloflex elektromos kerekesszék használata előtt el kell olvasnia ezeket a biztonsági és vezetési utasításokat.

Gyakorolja a

A gyakorlat teszi a mestert. Gyakorolja az Eloflex vezetését egy asszisztenssel együtt úgy, hogy egy nyitott felületen, lehetőleg a szabadban kezd, mielőtt a kerekesszék más emberek között, üzletekben, éttermekben stb. használná. Haladjon előre a joystick lassú előre mozgásával. Álljon meg a joystick elengedésével.

Visszafordítás

Tolasson vissza a joystick lassú visszafelé mozgásával. Megálláshoz engedje el a joystickot. Ne feledje, hogy a tolatás megkezdése előtt mindig nézzen hátrafelé, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs útban egy személy vagy tárgy.

Pörgés

Forgjon a joystick óvatos oldalirányú mozgásával. Vigyázzon, hogy pörgés közben semmi ne legyen az oldal útjában.

Fordulás

Forduljon meg vezetés közben a joystick óvatos oldalirányú mozgásával abba az irányba, amerre fordulni szeretne. Forduláskor mindig csökkentse a sebességet.

Akadály

Gyakorold az akadályok kikerülését és áthaladását. Mozgassa a joystickot oldalirányban, miközben előre felé haladva kikerüli az akadályokat. Ne felejtse el csökkenteni a sebességet, amikor akadályokhoz közeledik.

Gyors vezetés

Gyors vezetés: Nyomja a joystickot előre állásban, ha gyorsan szeretne vezetni. Ne felejtse el visszahúzni a joystickot és csökkenteni a sebességet, amint bizonytalannak érzi magát, függetlenül attól, hogy kanyarodik vagy akadályhoz közelít

Akadályokon való áthaladás

Hajtson lassan az akadályhoz, és győződjön meg arról, hogy az első kerekek a haladási irányban vannak. Ezután lassan mozdítsa előre a joystickot, miközben hátrahajolva áthajt az akadályon. Az Eloflexet legfeljebb 6 cm-es akadályokra tesztelték és hagyták jóvá.

Lejtős felületek

Ferde felület esetén próbáljon meg egyenesen felfelé vagy lefelé haladni. Hajoljon kissé előre, amikor felfelé hajt, és hátra, amikor lefelé, hogy a súlypontot megtartsa. Lehetőség szerint kerülje az oldalirányú vezetést, és az esetleges oldalirányú lejtést az ellenkező irányba való dőléssel kompenzálja. Lejtőn mindig lassan vezessen, és vegye figyelembe, hogy a féktávolság jelentősen nagyobb lehet, mint sík terepen. A kerekesszékek megengedett legnagyobb lejtésszöge 9 fok. Még ha az Ön Eloflexe képes is erre, kerülje az előírt vizsgálati szögénél nagyobb lejtőn való közlekedést, mert felborulás esetén fennáll a súlyos sérülések veszélye.

Felvonók

Ne felejtse el ellenőrizni a lifttajtó szélességét és azt, hogy az ajtó milyen gyorsan záródik, mielőtt beszáll a liftbe. Ne feledje, hogy ha a lift nem elég széles ahhoz, hogy meg tudjon fordulni, akkor előfordulhat, hogy tolatnia kell a felvonóból.

Közúton való közlekedés

Elsősorban járdákon, gyalog- és kerékpárutakon, végső soron pedig forgalmas utakon közlekedjen az Eloflex-szel.

Keresztezze az úttestet

Ha lehetséges, mindig a gyalogos-átkelőhelyet válassza az úttesten való átkeléshez. Figyeljen a keresztező autókra. Használja az útburkolat lekerekített részét, ha van rá lehetőség. Kerülje a 6 cm-nél magasabb járdaszegélyeket.

Gumiabroncsok

Ha a kerekesszék levegővel töltött gumiabroncsokkal van felszerelve, rendszeresen ellenőrizze a 2,5 bar nyomást. Kilyukadás esetén tartózkodjon a további vezéstől, és a javítás érdekében forduljon viszonteladójához vagy megfelelő javítóműhelyhez.

Biztonsági utasítások vezetés közben

A kerekesszék felborulásával súlyos sérülések veszélye áll fenn.

- Csak olyan emelkedőkön közlekedjen, amelyek nem haladják meg a megadott maximális szöveget
- Mindig használjon billenésgátlót, amikor az Eloflex-szel közlekedik
- Lejtőn lefelé mindig alacsonyabb sebességgel kell vezetni
- Kerülje az olyan területeket, ahol fennáll a jeges vagy csúszós felület veszélye
- Soha ne próbáljon meg lépcsőn fel- vagy lefelé közlekedni elektromos kerekesszékkel
- Soha ne hajtson át az ajánlott maximális magasságnál magasabb akadályokon.
- Kerülje a gyors mozdulatokat a joystickkal és a hirtelen haladási irányváltoztatásokat vezetés közben

Elakadás veszélye távoli helyeken.

- Egy erősen mozgáskorlátozott felhasználó ne vezessen egyedül hosszabb távokat a szabadban

Sérülésveszély, ha vezetés közben az egyik láb lecsúszik a lábtartóról és a motoros kerekesszék alá esik.

- Vezetés közben mindig helyezze a lábát a lábtartó közepére

Felfüggesztés

Ez a kerekesszék mind a négy keréken rugós felfüggesztéssel van felszerelve. Ez kiváló menetkomfortot biztosít, valamint javítja az akadályokon, kisebb járdaszegélyeken stb. való zökkenőmentes áthaladási képességét. A rugók előfeszítettek, és nem kell őket beállítani.

Sérülésveszély, ha más tárgyakkal ütközik.

- A szűk átjárókon a legkisebb sebességgel és a legnagyobb figyelemmel vezessen át
- Fokozottan figyeljen, amikor asztalok közelébe közelít vagy asztalok mellett vezet, mert az asztallap és a joystick és/vagy a kartámasz között fennáll a becsipődés veszélye.

Fennáll a kerekesszék felborulásának veszélye, ha a felborulásgátló eszközöket eltávolítják, megsérülnek vagy a szabványos rögzítéstől eltérő pozícióban szerelik fel.

- A billenésgátlót mindig fel kell szerelni, amikor a kerekesszék használják.
- A billenésgátlók csak szilárd felületen működnek. Puha felületen, például gyepen és havon a borulásgátló berendezés elveszítheti a hatását. Ezért vezessen
- rendkívül óvatosan a puha felületeken.



Biztonság

Vasúti síneken való átkelés

A vasúti síneken mindig egyenesen szemből kell átkelni, soha ne férdén, oldalról. Soha ne keljen át egyedül a vasúti síneken, mindig legyen Önnel valaki, aki segíthet Önnek.

Éles szélék

Legyen óvatos, ha meredek lejtőkön közlekedik, mert a szék könnyen eltörhet. Az Eloflex legfeljebb 9 fokos lejtőre van tesztelve és jóváhagyva. Mindig legyen Önnel valaki, aki tud segíteni.

Magas élek

Legyen óvatos, amikor felfelé vagy élekre hajt, vagy ki. Az Eloflex legfeljebb 6 cm-es élekre van tesztelve és jóváhagyva. Mindig legyen Önnel valaki, aki tud segíteni.

Áthelyezés

Javasoljuk, hogy mindig legyen Ön mellett valaki, aki tud segíteni az Eloflexre való fel- és leszállásnál. A mozgás megkezdése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Mozdulás előtt mindig emelje fel a kar- és lábtámaszt, hogy megkönnyítse a székbe való be- és kiszállást.

Ne javítson egyedül

Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani az elromlott elektromos kerekesszéket. Ha megpróbálja saját maga megjavítani a széket, a garancia nem érvényes. Mindig forduljon az Eloflexhez vagy a széket értékesítő/felíró üzlethez vagy asszisztens központhoz. Soha ne módosítsa saját maga a motoros kerekesszéket.

Nincs játék

Soha ne engedje, hogy olyan gyermekek, akik általában nem használnak elektromos kerekesszéket, ráüljenek az Eloflexre vagy használják azt.

Tisztítás

Soha ne tisztítsa az Eloflexet folyó vízzel. Csak nedves ruhával törölje át. Ha az Eloflex lassan hajtódik össze és össze, olajjal vagy szilikon spray-vel kenje be az ízületeket.

Óvakodjon a hőtől

Soha ne hagyja az Eloflexet közvetlen napfényben, hőforrás vagy nyílt tűz közelében. Az elemek megsérülhetnek, és egyes felületek annyira felforrósodhatnak, hogy fennáll a sérülés veszélye. Az Eloflexet -10 foktól +45 fokig használhatja. Alacsony hőmérsékleten a vezetési hatótávolság csökken. A kerekesszék az EN 12184 szabvány szerint gyújtásbiztos.

Tárolás

Tartsa az Eloflexet gyermekek elől elzárva, amikor nem használja. A széket fagymentes, száraz és szellőztetett helyen, zárt térben kell tárolni. Tárolási hőmérséklet 0-30 fok.

A töltő

A töltőt soha nem szabad letakarni, amikor az Eloflex töltésére használják. A töltő felforrósodik, és fennáll a baleset vagy sérülés veszélye.

Akkumulátorok

Soha ne tárolja az akkumulátorokat közvetlen napfényben vagy olyan helyen, ahol a hőmérséklet nulla fok alá csökkenhet. Az akkumulátorokat száraz és szellőző helyen kell tárolni. Megsemmisítés esetén az akkumulátorokat újra kell hasznosítani

a nemzeti/helyi előírásoknak megfelelően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy mint minden akkumulátoros termék esetében, a hatótávolság idővel csökken, beleértve a garanciaidő és a termék élettartamát is.

Használat

Az Eloflex elektromos kerekesszéket úgy tervezték, hogy különböző igényeket elégítsen ki. A felhasználó számára való alkalmasságára vonatkozó döntést a koordinátor vagy viszonteladó és a felhasználó közösen hozza meg. Az Eloflex nem vállal felelősséget azért, ha a motoros kerekesszék nem megfelelően igazodik a felhasználó igényeihez.

Módosítások

Az Eloflexet elsősorban alapkonfigurációban kell használni. Bármilyen módosítást vagy beállítást csak az Ön által megbízott szervizközpont vagy az Eloflex végezhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a használati utasításnak nem megfelelő módosítások vagy a nem megfelelő karbantartás miatt bekövetkezett károk vagy meghibásodások nem tartoznak a garancia hatálya alá.

Általános biztonsági utasítások

Személyi sérülés veszélye áll fenn, ha a kerekesszéket a jelen dokumentumban leírtaktól eltérő célokra használják.

- A motoros kerekesszéket csak a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően használja (lásd fentebb, "Típusbesorolás és rendeltetésszerű használat" fejezet).
- Soha ne használja (ne üljön bele) a kerekesszéket, miközben azt egy másik járműben személygépkocsiban/buszban szállítják.

Személyi sérülés veszélye áll fenn, ha a motoros kerekesszéket csökkentett vezetési képességgel használják.

• Ne használja a kerekesszéket, ha vezetési képességei például betegség, gyógyszeres kezelés vagy alkohol miatt csökkentek.

Sérülésveszély áll fenn, ha a motoros kerekesszéket akaratlanul elmozdítják.

- Kapcsolja ki a kerekesszéket a beszállás és kiszállás előtt, vagy ha fennáll a veszélye annak, hogy Ön, egy másik személy vagy egy tárgy érintkezhet a joystickkel.
- Ha a motorok ki vannak kapcsolva, a fékek nem működnek. Ezért a kerekesszéket csak sík terepen szabad tolni, lejtőn soha. Soha ne hagyja a kerekesszéket kikapcsolt motorokkal lejtőn vagy lejtő közelében.

Személyi sérülés veszélye áll fenn, ha a motoros kerekesszéket menet közben kikapcsolják, például a be/kikapcsoló gombbal vagy a kábel letépésével, mivel az egy kemény rántással megáll.

- Vészfékezéskor engedje el a joystickot. Ekkor a kerekesszék automatikusan megáll.

A kerekesszékbeli való leesés miatt fennáll a sérülés veszélye

- Ne mozogjon előre, ne hajoljon előre a térdei között, és ne hajoljon a kerekesszék pereme fölé, például tárgyak eléréséhez.
- Javasoljuk, hogy mindig használja a biztonsági övet, és minden utazás előtt állítsa be újra.
- Az ülések/járművek közötti átszálláskor a lehető legközelebb vezessen az új pozícióhoz, hogy a lehető legkisebb legyen a rés és a kerekesszék felborulásának kockázata.

A megengedett maximális terhelés túllépése esetén fennáll a személyi sérülés veszélye.

- Tartsa be a maximálisan megengedett terhelést (lásd a "Műszaki adatok" fejezetet a dokumentum hátulján).
- A motoros kerekesszéket csak egy személy használhatja. Soha ne használja a kerekesszéket egyszerre több személy szállítására.

Személyi sérülés és a kerekesszék károsodásának veszélye áll fenn, ha a motoros kerekesszék használatakor az összecsukható zár nem megfelelően rögzítve oldódik ki.

- Ha a motoros kerekesszék reteszelve nem kattant be megfelelően, a szék használat közben hirtelen összecsukódhat, ami a kerekesszékbeli való kiesést okozhatja.
- A motoros kerekesszék használata előtt mindig győződjön meg arról, hogy a reteszelőhorog megfelelő helyzetben van.
- A kerekesszék összecsukása során fennáll a személyi sérülés és az összenyomódás veszélye.
- A motoros kerekesszéket mindig a használati utasításban leírtak szerint hajtja össze és emelje fel.
- Ügyeljen arra, hogy össze- és széthajtáskor semmi vagy senki ne szoruljon be.

Személyi sérülés és a kerekesszék károsodásának veszélye áll fenn, ha a kerekesszéket nedves helyen használja.

- A motoros kerekesszéket nem szabad használni hőségben.
- A motoros kerekesszéket nem szabad fürdés közben használni.
- Kerülje a hosszabb ideig tartó esős időben történő vezetést.

EMC

- Fennáll annak a veszélye, hogy a kerekesszék elektromágneses mezők miatt zavarja a berendezéseket, vagy azok megzavarhatják azokat. Ez hatással lehet a kerekesszék vezérlésére.
- Ez a készülék Bluetooth adóval van felszerelve. További információkért forduljon a viszonteladójához.

Műszaki specifikációk R

Nettó súly	29 kg elemek nélkül
Teljes súly	32,5 kg elemekkel együtt
Sebesség	6,5 km/h
Távolság	30 km*
Időtartam	5 óra töltésenként
Motor	2 x kefe nélküli, nagy teljesítményű motor
Motor hatása	2 x 250 Watt
Akkumulátor	2 x Litium ION 10 AH / 24 V (240 Wh) (+1 extra slot)
Akkumulátor súlya	1,8 kg
Töltési idő	3 óra
Fordulási sugár	88 cm
Max. dőlésszög	9 fok statikus, 6 fok dinamikus
Kerekek	elöl 8" (tömör), hátul 12" (levegős) (2,5 bar)
Ülésmagasság	55 cm
Ülés szélessége	43 cm
Ülésmélység	43-48 cm
Max. felhasználói súly	160 kg
Joystick	Jobbra vagy balra szerelve
Párna	Levehető, levehető fedél
Háttámla	8°- 30°
Méret	102,5 cm (magasság) x 62 cm (szélesség) x 108,5 cm (mélység)
Összehajtott méret	44 cm (magasság) x 62 cm (szélesség) x 89 (87**) cm (mélység)
Garancia	2 év
Max. akadály	5 cm

* Távolság optimális körülmények között, és befolyásolja a hőmérsékletet, a vezetési stílus, a tengerszint feletti magasság, az akkumulátor állapota stb.

** Vádlításmász eltávolítva

© Copyright Eloflex

Ez a dokumentum szerzői jogvédelem alatt álló információkat tartalmaz, és az Eloflex írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható vagy sokszorosítható. Az Eloflex nem vállal felelősséget a dokumentumban található esetleges elírásokért, és fenntartja a termékváltoztatások jogát.



2021-05-08

Version 2.0

Sungo Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE

Amsterdam, Netherlands

SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd

No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu

Kapcsolatfelvétel az Eloflex-szel

Ha bármilyen kérdése van, segítségre van szüksége, vagy információra van szüksége a termékvisszahívásokkal vagy biztonsági közleményekkel kapcsolatban, kérjük, forduljon a segítő központjához vagy a helyi márkakereskedőhöz. Szükség esetén a termék sorozatszámát az alváz alján található matricán találja.



Eloflex
Hammarbacken 4B
191 49 Sollentuna
SWEDEN

+46 10-18 33 100
info@eloflex.eu
www.eloflex.hu