

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ELOFLEX H

Olvassa el ezt a leírást, mielőtt használatba veszi Eloflexét, hogy biztonságosan, valamint környezetére, önmagára, és motoros kerekesszékeire veszélytelen módon tudja működtetni azt.



ELOFLEX

Köszönjük, hogy az Eloflexet választotta!

Sokat jelent számunkra, hogy az Eloflexet választotta, mivel célunk az, hogy az emberek életét egy kicsit megkönnyítsük, és, hogy a fogyatékkal élők nagyobb szabadsághoz segíthessük. Reméljük, hogy Ön az Eloflexszel mindkettőt megtapasztalhatja.

Ez az útmutató fontos információkkal szolgál a biztonság, az általános használat és a termék gondozása szempontjából. Ezért javasoljuk, hogy mielőtt először veszi használatba Eloflexét, olvassa el a teljes dokumentumot. Úgyszintén javasoljuk, hogy gyakorolja kerekesszéke használatát elzárt területen, nyílt és vízszintes terepen, mielőtt bármilyen egyéb környezetben használná. Az Eloflex motoros kerekesszék különböző felhasználók sokféle igényének megfelelően lett kialakítva. A döntést, hogy az Eloflex megfelel-e a jövőbeni felhasználó igényeinek, az eladónak mindig a jövőbeni felhasználóval együtt kell meghoznia. Cégünk nem vállal felelősséget olyan esetben, ahol ennek hiányában a kerekesszék nem lett a felhasználó igényeihez igazítva.

Az Eloflexet elsősorban gyári kialakításában célszerű használni. Ha a kerekesszék átalakítása szükséges, vagy bármilyen formában meg kell változtatni, azt csak egy segélyközpontban vagy magánál az Eloflexnél lehet megtenni. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a használati útmutatótól eltérő üzemeltetésből, illetve helytelen karbantartásból adódó meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

Minden jót kívánunk Eloflexéhez!

Vezessen óvatosan!



Tartalom	Oldal	Oldal	
Felhasználási terület	3	Biztonsági öv	9
Összeállítás	4	Deréktámasz beállítása	10
Összecsukás	5	Háttámla beállítása	10
A joystick installálása	6	A zárómechanizmus beállítása	11
Hajtsa le a joystickot	6	Szállítás és tárolás	11
Töltési útmutató	7	Írányító kar	12
Manuális használat	7	Navigálás a menüben	13
A kartámasz beállítása	8	Vezetés	14-15
Lábtartó	8	Biztonság	16-17
Írányító Fogantyú	9	Műszaki adatok	18
Borulásgátló	9	Kapcsolattartási adatok	18

Felhasználási terület

Típusbesorolás és felhasználási terület

Az Eloflex motoros kerekesszék olyan emberek számára lett kifejlesztve, akik nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak járni, de akik jól látnak, és rendelkeznek a testi, és mentális képességekkel egy motoros kerekesszék irányításához.

Az Eloflex motoros kerekesszék elég kompakt a belső térben való alkalmazáshoz, ugyanakkor kültéri használatra is alkalmas. A "Műszaki adatok" című fejezet, mely a dokumentum végén található tartalmazza a vonatkozó információkat, mint például a sebesség, fordulási sugár, hatótávolság, maximális emelési kapacitás, a felhasználó megengedett maximális tömege, és így tovább. Javasoljuk, hogy a "Biztonság" fejezet alatt található valamennyi biztonsági információval is ismerkedjen meg.

Az Eloflexet az EN12184: 2014 szabvány szerint tesztelték és jóváhagyták - B osztály (beltéri és kültéri használatra). Az Eloflex az ISO-7176, IEC60601, az akkumulátorok pedig az UN38.3 szabvány szerint is jóváhagyottak. Az Eloflex elektromos kerekesszék megfelelnek az MDR 2017/745 vonatkozó követelményeknek.

Az 1. osztályú megfelelőségértékelés / CE-jelölés az MDR 2017/745 VIII. melléklet III. fejezete szerint került kiadásra. Megfelelőségértékelési eljárás: MDR 2017/745 II. és III. melléklet. A CE jelölés érvénytelen, ha olyan pótalkatrésszel vagy kiegészítővel használják, amely nem került jóváhagyásra.

Igények

Az Eloflex motoros kerekesszék célja sérülés vagy fogyatékoság kompenzálása, és ezért a következő esetekben ajánlott:

- Ha a felhasználó nem járóképes, vagy csak nagyon kevésbé, mely megnehezíti az otthonában való mozgást.
- Ha el kell hagynia otthonát, hogy a levegőn lehessen, vagy olyan helyekre jusson el, ahová mindennapi tevékenységek végzése szólítja el.
- Az Eloflex motoros kerekesszék használata bel- és kültéren egyaránt javasolt, ha mozgásszervi problémák miatt nem lehetséges hagyományos kerekesszék használata, de motoros kerekesszék használata viszont megoldható.

Kiegészítők

A töltő és az egyszerűbb szerszámokat tartalmazó csomag megtalálható az ülés alatt.

Használhatóság

Csak abban az esetben használja az Eloflex kerekesszékét, ha az teljesen működőképes. Egyéb esetben önmagát és másokat veszélyeztethet. A következő lista nem tartalmazza az összes elképzelhető helyzetet, csupán olyan szituációkat ír le, amelyek a motoros kerekesszék használhatóságát befolyásolhatják.

- Ne használja a motoros kerekesszékét, ha az akkumulátorok hibásak, vagy deformáltak.
- Ne használja a motoros kerekesszékét, ha a motor ugrik, vagy szokatlan hangokat ad ki.
- Ne használja a motoros kerekesszékét, ha a fékfunkciók hibásnak tűnnek.
- Ha a kerekek kopottak, lépjen kapcsolatba a segélyközponttal vagy az eladóval.
- Ha a biztonsági öv, kartámasz, ülés, háttámla, joystick vagy bármely egyéb alkatrész sérülését fedezi fel, lépjen kapcsolatba a segélyközponttal vagy az eladóval.
- Ha az elektronika (kábelek, akkumulátorok, töltők, stb.) hibáját fedezi fel, lépjen kapcsolatba a segélyközponttal vagy az eladóval.

Gyártói jótállás

Az Eloflex jótállás keretében kicseréli a tönkrement alkatrészeket, amennyiben nem a felhasználó okozta a kárt. A jótállás nem vonatkozik a külső körülmények, pl. lopás, visszaélés, helytelen használat, villámcsapás vagy módosítás miatt bekövetkezett káresetekre.

Élettartam

Az Eloflex becsült élettartama 5 év. Ugyanakkor a termék élettartama jelentős mértékben függ a használat mibenlététől és módjától. Az Eloflex élettartama jelentősen kitolódhat, ha gondosan, és csak az ebben a dokumentációban leírtaknak megfelelően van használva.

Biztonsági szabályozás és veszélyek

KÉRJÜK, OLVASSA EL A 14-İK OLDALON TALÁLHATÓ BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓKAT AZ ELOFLEX HASZNÁLATÁT MEGELŐZŐEN!



Kinyitás

Összeállítás

1. Állítsa fel a összecukott széket függőlegesen, és hajtsa ki a lábtámlát. Kép 1.
2. Fogja meg a háttámla hátsó részén lévő fogantyút, és húzza hátra. Közben tartsa meg az ülés párnát az egyik kézzel. Kép 2.
3. Zárja be a zárózárat. Kép 3.
4. Hosszabbítsa meg a billentővédőket a gomb megnyomásával, majd billentse ki a billentővédőt. Kép 4.
5. Emelje fel az kartámaszokat a kívánt magasságra. Kép 5.



FONTOS!

Nagyon fontos, hogy zárja le a zárat mielőtt a széket használatba veszi.



1




2



3



4

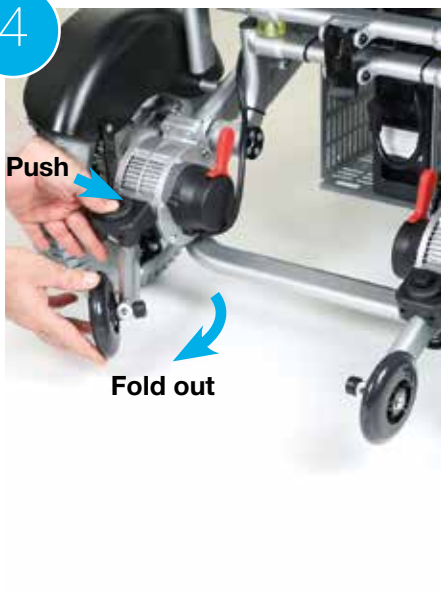

5




Kinyitás

Összecsukás

1. Engedje le a karfákat. Kép 1.
2. Hajtsa be a billenést megakadályozó védelemmel a gomb lenyomásával, majd hajtsa be őket befelé. Kép 2.
3. Nyissa ki a záró reteszt. Kép 3.
4. Fogja meg a háttámla hátulján lévő fogantyút, és tolja előre. Eközben tartsa az üléspámát az egyik kézzel. Kép 4.
5. Hajtsa be a lábtartót. Kép 5.



További információkért
a karfák beállításáról nézze meg a 8. oldalt.

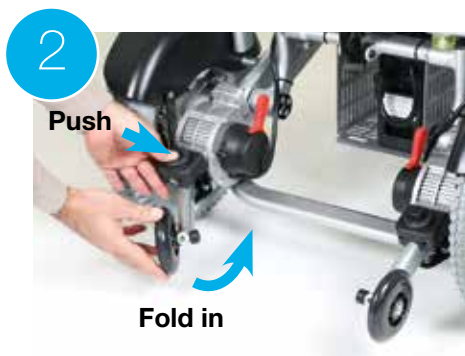

A joystick installálása


Első lépés

Helyezze a joystickot a kartámasz alatti csőbe és a csavart szorítsa meg úgy, hogy a kívánt helyzetben álljon.



Második lépés

Illessze össze a kábel összekötő elemeket, és finoman forgassa, amíg a tűk bele nem illeszkednek a lyukakba és a két összekötő elem vágatai összeilleszkednek. Ezután minden elemet csavarja össze a rögzítő gyűrűket.

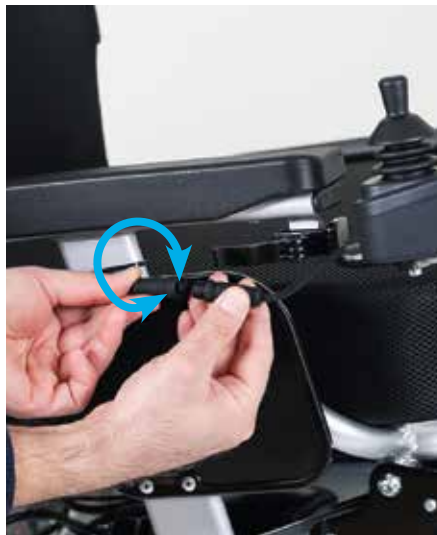

Hajtsa le a joystickot

Az ügyes joystick konzol lehetővé teszi, hogy lehajthassa a joystickot. Ennek eredményeképpen közelebb tud menni az asztal széléhez, amely jobb ülési pozíciót ad.

1. Nyissa ki a zárat
2. Lassan húzza előre fele a konzolt. Azután hajtsa le a joystickot.



Töltési útmutató

A feltöltés módja

Először kapcsolja ki az Eloflex kerekesszéket (a botkormányon található lámpáknak kikapcsolt állapotban kell lennie). Csatlakoztassa a töltőt a botkormány elülső részén található aljzatba. Gondoskodjon arról, hogy az érintkezők helyzete egymással megegyező legyen. Ezt követően csatlakoztassa a töltő tápkábelét egy fali aljzatba.

A töltés menetét a töltőn található lámpa jelzi. A piros lámpa jelzi, hogy folyamatban van a töltés. Az akkumulátorok körülbelül három órát követően érik el a 90 százalékos töltöttségi szintet. Ekkor újból használhatja a széket.

5-8 órát követően a töltőn található lámpa zöld színre vált át, az akkumulátorok pedig teljesen feltöltődtek. Töltés közben előfordulhat, hogy felmelegedik a töltő. Ez normális. A töltési utasításokat nagyjából öt órán át kell követni, ha a botkormányon az akkumulátor-töltöttség jelzőjén már három vonallal kevesebb látszik.

Fenntartó töltés esetén nem károsodnak az akkumulátorok, azonban az akkumulátor maximális élettartama

érdekében javasoljuk, hogy válassza le a töltőt, amikor teljesen feltöltődtek az akkumulátorok. Az akkumulátorok töltését -10 fokig lehet elvégezni. Ennél alacsonyabb hőmérséklet esetén nem fognak teljesen feltöltődni az akkumulátorok.

Ha fagypont alatti hőmérsékletekben használja az Eloflex-et, az hatással lesz a megtehető távolságra. Például -10 fok esetén a megtehető távolság akár 50%-kal csökkenhet.



FONTOS!
SOHA Ne
csatlakoztassa A
töltőt közvetlenül az
akkumulátorhoz.

Manuális használat

Kapcsolja ki a kerekesszéket a kikapcs gombbal. Tolja előre a motoron található piros kart (lásd a képen), hogy lekapcsolódjunk a mágnes fékről. Ebben a pozícióban a kerekesszék tologatható.

Fontos! Ha a felhasználó segítség nélkül használja, akkor a mágnesféknek mindig be kapcsolva kell lenni!



A kartámasz beállítása

Az optimális üléscomforthoz tudja állítani a kartámasz magasságát.

1. Nyissa ki a zárat.
2. Majd emelje vagy süllyessze a kart a kívánt magasságba.
3. Rögzítse a zárat.



TIPP!

Lehetséges az is, hogy teljesen eltávolítsa a karfákat könnyebb be- és kiszállás érdekében.

Lábtartó

A könnyebb ki/beszállás érdekében a lábtartó felhajtható, ahogy az alábbi képen látható.



Írányító Fogantyú

Az irányító fogantyút arra használják, hogy kézi erővel tologassák a széket. Az irányító fogantyút fel lehet hajtani, amikor nem használják.



Borulásgátló

Összecsukhatja a billenést megakadályozó védelmet, amikor összecsukja a széket és szállítja.

1. Nyomja meg a gombot
2. Hajtsa be a billenést megakadályozó védelmet.

FONTOS! A borulásgátlónak mindig kihajtott állapotban kell lennie, amikor használja a kerekesszéket.



Biztonsági öv

A biztonságos vezetés érdekében javasoljuk, hogy mindig használja a biztonsági övet a szék kezelése közben.



Deréktámasz beállítása

Az H modell kényelmes deréktámasszal van felszerelve az optimális ülésnényelem érdekében. A deréktámasz beállításához kövesse ezeket a lépéseket:

- 1.** Emelje fel a háttámla elülső részét.
- 2.** Lazítsa vagy szorítsa meg a deréktámaszt a Velcro rögzítővel a kívánt szintű támogatáshoz.
- 3.** Ha nem szeretne deréktámaszt, távolítsa el az egész deréktámaszt.



Háttámla beállítása

Húzza fel a hátsó szegélyt, majd húzza meg a Velcro pántokat a kényelmes ülésnényelemhez. Ezután hajtsa le a szegélyt, és nyomja meg könnyedén, hogy beakadjon a Velcro szalagokba.



A zárómechanizmus beállítása

Fontos, hogy az Eloflex szék zárómechanizmusa ellenállással mozogjon, amikor felfelé és lefelé húzzák. Elég nehéznek kell lennie ahhoz, hogy magától egyenes helyzetben maradjon. Ez létfontosságú annak biztosításához, hogy a zárómechanizmus akkor is biztonságosan zárt helyzetben maradjon, amikor a rugók összenyomódnak.

A zárómechanizmus ellenállásának növeléséhez csak meg kell húznia a rögzítőt a két hatszögfejű csavarral, amelyek a zárómechanizmust a helyén tartják.



Fontos, hogy a zárómechanizmus ellenállással mozogjon felfelé és lefelé annak érdekében, hogy ne nyíljon ki a szék használata közben.

Szállítás és tárolás

- Felemelés előtt ajánlatos összehajtani a kerekesszéket.
- Az összehajtott kerekesszék betehető a csomagtartóba, vagy a gardróbba.
- Ha hosszabb ideig nem használja a kerekesszéket ajánlott teljesen feltölteni az akkumulátorokat, mielőtt elteszi a kerekesszéket.
- A kerekesszéket ajánlatos beltérben tárolni, ami fagymentes, száraz és jól szellőző. Tárolási hőmérséklet 0-30 fok között.
- Repülővel történő szállítás esetén, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a légitársasággal. Az Eloflex a IATA ajánlásait követi.



- Amikor a kerekesszéket buszon vagy mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas eszközön szállítja, az Eloflexet muszály rögzíteni a biztonsági pontokon, ami az also képen látható. Ne feledje, hogy az Eloflex nincs tesztelve autos ülésként! Azt ajánljuk, hogy a használó mindig üljön át az auto ülésre.

Írányító kar



1 2 3

1 Sebességjelző: Minden vonal fehér = maximális sebesség

2 Kilométer-számláló: Ez mutatja az eddig megtett távolságot és az aktuális sebességet.

3 Akkumulátorkezelő: Jelzi, hogy mennyi energia van még az akkumulátorokban. Ha az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve, minden vonal fehér. Az akkumulátorok merülése során egymás után alszanak ki a vonalak. Akkor töltsé fel, amikor már három vonal kialudt.

USB csatlakozó

TIPP: Telefon töltésre használhatja az USB csatlakozót a joystick alatt.



Töltő aljzat

Lámpa



Írányító kar: Kontrolálja a kerekesszék sebességét és a haladás irányát.




Sebesség növelése: Nyomja meg ha szeretné növelni a kerekesszék sebességét.



Ki és bekapcsológomb: Nyomja meg a kerekesszék ki/be kapcsolásához.



Sebesség csökkentése: Nyomja meg, ha csökkenteni szeretné a kerekesszék sebességét.

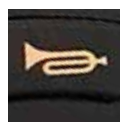

Kürt: Nyomja meg, ha jelezni szeretné, hogy Önre figyeljenek.



Be/Ki lámpa: Nyomja meg az "on" "off" gombot a világítás "ki" és "be" kapcsolásához.

Navigálás a menüben

Beállítások módosítása

Lehetősége van módosítani a szék beállításait, legyen az például a nyelv, a kürt hangereje vagy a mértékegységek.


1. A beállításokba való belépéshez nyomja meg a jobb oldali multifunkciós gombot. Ezzel megnyílik egy lista, különböző választási lehetőségekkel.



2. A több választást is biztosító listában a sebesség gombokkal tud fel/le görgetni.



3. Válassza ki az adott funkciót a jobb oldali multifunkciós gombbal (Enter [Bevitel]), vagy ugorjon vissza egy lépéssel a bal multifunkciós gomb (Return [Vissza]) segítségével.back one step with the left multifunction button (Return).

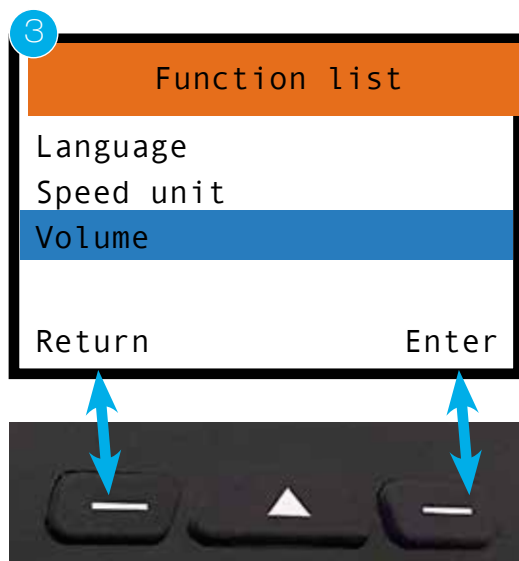

Biztonsági szabályok vezetés közben

A kerekesszék billenése sérülésveszélyes.

- Csak olyan lejtőn használja, amely nem haladja meg a maximálisan megengedett lejtésszöveget.
- Mindig használjon billenésgátlót az Eloflexszel való utazás során.
- A lejtőn lefelé vezetés mindig alacsonyabb sebességgel történjen.
- Kerülje azokat a területeket, ahol fennáll a jeges vagy csúszós felületek veszélye.
- Soha ne próbáljon felfelé vagy lefelé lépcsőzni a motoros kerekesszékekkel.
- Soha ne haladjon olyan akadályokon, melyek magasabbak az ajánlott maximumnál.
- Kerülje a gyors kormányozásokat és a hirtelen irányváltásokat vezetés közben.

Elakadásveszély távoli helyen.

- Ne vezessen egyedül a szabadban hosszabb távon.

Vezetés közben sérülésveszélyes, ha valamelyik lába lecsúszik a lábtartóról a motoros kerekesszék alá.

- Vezetés közben mindig tartsa a lábát a lábtartó közepén.

Sérülésveszélyes, ha összeütközik más tárgyakkal a keskeny utakon.

- A legkisebb sebességgel és a legnagyobb figyelemmel vezessen a keskeny helyeken

Fennáll annak a veszélye, hogy a kerekesszék megbillen, ha a billenésgátló eszközöket eltávolítják, megrongálják vagy olyan helyzetbe helyezik, amely eltér a szabályos rögzítéstől.

- A billenésgátlók mindig legyenek felszerelve a motoros kerekesszék használata esetén.
- A billenésgátlók csak szilárd felületen működnek. Puha felületeken mint pázsiton és havon elveszíthetik hatásukat. Ezért rendkívül óvatosan vezessen puha felületen.



Olvasás

kerekesszék használójának el kell olvasnia az itt leírt biztonsági és vezetési útmutatásokat mielőtt használni kezdi az Eloflex kerekesszéket.

Gyakorlás

Gyakorlat teszi a mestert. Gyakorolja Eloflex kerekesszékének vezetését, irányítását egy segítővel, kezdetben nyílt, sík terepen, lehetőleg kültéren, mielőtt emberek között, boltokban, éttermekben, stb kezdené el használni.

- Előre haladáshoz tolja a joysticket lassan előre
- Megálláshoz engedje el a joysticket

Hátramenet

Hátramenetbe tolja a joysticket lassan hátra. Megálláshoz engedje el a joysticket. Hátrafelé haladás előtt mindig nézzen hátra, hogy megbizonyosodhasson róla, hogy nincsen az útjában sem személy sem más akadály.

Forgás

Egyhelyben forgáshoz mozdítsa a joysticket finoman oldalra. Vigyázzon, hogy semmilyen akadály ne essen útjába forgás közben.

Kanyarodás

Menet közbeni forduláshoz finoman tolja a joysticket abba az irányba, amerre fordulni kíván. Mindig csökkentse a sebességét fordulásakor.

Akadály

Gyakorolja az akadályok kikerülését és az akadályokon való áthaladást. Menet közben mozgassa oldalra a joysticket az akadályok elkerüléséhez. Mindig csökkentse a sebességét, ha akadályhoz közelít.

Gyors haladás

Gyors haladás. Nyomja a joysticket előre ha gyorsan kíván előre haladni. Mindig húzza vissza joysticket és csökkentse sebességét ha bizonytalannak érzi a haladást, illetve ha fordul vagy akadályhoz közelít.

Áthaladás akadályon

Áthaladás akadályon. Haladjon lassan az akadályhoz és bizonyosodjon meg róla, hogy az első kerekek a haladás irányának megfelelően állnak. Ezután lassan tolja előre a joysticket és közben dőljön hátra az akadályon való áthaladáshoz. Az Eloflex kerekesszék számára a tesztelt és megengedett maximális akadály mérete 6 cm.

Haladás emelkedőn és lejtőn

Haladás emelkedőn és lejtőn. Próbáljon egyenesen felfelé haladni az emelkedőn illetve lefelé haladni a lejtőn. Felfelé menet kissé dőljön előre, míg lefelé menet kissé dőljön hátra a súlypont középen tartása érdekében. Lehetőség szerint kerülje az oldalirányú haladást emelkedőn/lejtőn és az esetleges oldalirányú megcsúszásokat kompenzálja ellenkező oldalirányba dőléssel. Mindig lassan haladjon emelkedőn és lejtőn. Kerülje a 9 fokosnál nagyobb emelkedőket/lejtőket.

Liftek

Lift használata. Mindig ellenőrizze a lift ajtájának szélességét, valamint, hogy a lift ajtaja milyen gyorsan záródik, mielőtt beszállna a liftbe. Tartsa észben, hogy előfordulhat, hogy hátramenetben kell elhagynia a liftet, amennyiben a lift beltére nem elegendően nagy ahhoz, hogy megforduljon benne a kerekesszékekkel.

Vezetés az úton

Elsődlegesen a sétáló utakat, járdákat, illetve a kerékpár utakat használja. Kerülje el a forgalmas utakat, erre csak legvégső esetben menjen, de ha lehet, kerülje el a biztonságos közlekedés érdekében.

Átkelés úttesten

Átkelés úttesten. Amennyiben ez lehetséges, mindig egy kijelölt gyalogosátkelőhelyet válasszon az úttesten való átkeléshez. Ügyeljen az útját keresztező autókra. Használja a járda akadálymentesített szakaszát, ha van ilyen. Kerülje a 6 cm-nél magasabb járdaszegélyeket.

Általános biztonsági útmutatások

Az elektromos kerekesszék jelen dokumentumban ismertetett módoktól eltérő használata személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- Az elektromos kerekesszéket kizárólag jelen útmutató szerint használja (lásd feljebb az útmutató "Típusbesorolás és felhasználási terület" pontját).

Az elektromos kerekesszéket kizárólag jelen útmutató szerint használja (lásd feljebb az útmutató "Típusbesorolás és felhasználási terület" pontját).

- Ne használja az elektromos kerekesszéket, ha járművezetési képességei megromlottak például betegség, gyógykezelés vagy alkoholos befolyásoltság okán.

Az elektromos kerekesszék akaratlan mozgatása sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- Kapcsolja ki a kerekesszéket, mielőtt be- vagy kiszáll belőle vagy ha fennáll a veszélye annak, hogy Ön vagy egy másik személy vagy egy tárgy hozzáérhet a joystickhoz.
- Amikor a motorok kikapcsolt állapotban vannak a fékek nem működnek. Emiatt a kerekesszéket kizárólag sík talajon szabad tolni, emelkedőn és lejtőn soha. Soha ne hagyja a kerekesszéket emelkedőn/lejtőn vagy annak közelében kikapcsolt motorokkal.

Személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár az elektromos kerekesszék menet közbeni kikapcsolása például a BE/KI kapcsoló gomb használatával vagy egy kábel kitépésével, mivel ez a kerekesszék hirtelen történő megállását okozza.

- Vészfékezéshez engedje el a joystickot. Ekkor a kerekesszék automatikusan megáll.

A kerekesszékből való kiesés sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.

- Ne mozduljon előre, ne hajoljon előre a térdei között és ne hajoljon át a kerekesszék peremén, hogy például elérjen egy tárgyat.
- Mindig használjon biztonsági övet és állítsa azt be újra minden indulás előtt.
- Amennyire csak lehet álljon közel a másik székhez, amibe át kíván szállni.

- Az elektromos kerekesszék maximális terhelhetőségének túllépése személyi sérülés bekövetkezésének kockázatával jár.
- Az elektromos kerekesszéket egyszerre egyetlen személy használhatja. Soha ne használja a kerekesszéket egyszerre egynél több személy szállítására.

Személyi sérülés bekövetkezésének és a kerekesszék sérülésének kockázatával jár a kerekesszék használata ha a zár nincs megfelelően a helyére rögzülve és használat közben kinyílik.

- Ha a kerekesszék zárja nincs a helyére kattintva megfelelően, akkor megtörténhet, hogy a szék használat közben hirtelen összecusklis, amely a székéből való kieséshez vezethet.
- Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy a zárókampó a helyes pozícióban van mielőtt használja az elektromos kerekesszéket.

Az kerekesszék összehajtása személyi sérülés és a kerekesszék összeütődésének kockázatával járhat.

- Mindig az útmutatóban ismertetett módon állítsa és csukja össze a kerekesszéket.
- Figyeljen rá, hogy senki és semmi ne nyomódjon össze, amikor összeállítja és összecusukja a széket.

Személyi sérülés bekövetkezésének és a kerekesszék sérülésének kockázatával jár a kerekesszék nedves, párás, nyirkos helyen történő használata.

- Az elektromos kerekesszéket tilos zuhanyzás közben használni.
- Az elektromos kerekesszéket tilos fürdés közben használni.



Átkelés vasúti síneken

Átkelés vasúti síneken. Mindig merőlegesen keljen át vasúti síneken, soha ne ferdén, rézsútosan. Soha ne kelljen át egyedül vasúti síneken, mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek.

Meredek utak

Legyen óvatos, amikor meredek emelkedőkön, lejtőkön halad, mert a kerekesszék megbillenhet. Az Eloflex kerekesszék számára maximum 9 fokos meredekségű emelkedő / lejtő a tesztelt és megengedett. Mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek.

Magas szegélyek

Legyen óvatos, amikor egy szegélyre fel- vagy szegélyről lejját. Az Eloflex kerekesszék számára a tesztelt és megengedett maximális szegély magassága 6 cm. Mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek.

Átszállás

Javasoljuk, hogy mindig legyen Önnel valaki, aki segíteni tud Önnek az EloFlex kerekesszékbe történő ki- és beszállások során. Mindig kapcsolja ki a kerekesszékét mielőtt ki- vagy beszáll. Mindig hajtja fel a kartámaszt és lábtámaszt ki- és beszállás előtt, hogy megkönnyítse azt.

Ne kísérelje meg javítani

Soha ne kíséreljen meg önállóan megjavítani egy elromlott elektromos kerekesszékét. Ha megkísérli önállóan megjavítani a széket, a jótállás érvényét veszti. Mindig forduljon az Eloflex-hez vagy az üzlethez, viszonteladóhoz, ahonnan a kerekesszékét vásárolta. Soha ne módosítsa önállóan a kerekesszékét.

Nem játék

Soha ne engedje meg gyerekeknek, akik saját maguk nem használnak elektromos kerekesszékét, hogy az Ön Eloflex kerekesszékét használják vagy azon üljenek.

Tisztítás

Soha ne tisztítsa Eloflex kerekesszékét folyóvízzel. Csak törölje le nedves ruhával. Ha az Eloflex kerekesszéké lassan nyílik és csukódik, megolajozhatja az csuklópontokat olajjal vagy szilikon spray-vel.

Óvja a hőségtől

Soha ne hagyja Eloflex kerekesszékét közvetlen napsugárzásnak kitett helyen vagy hóforrás közelében mert az akkumulátor károsodhat. Soha ne legyen nyílt láng közelében a kerekesszékkel. A kerekesszék - 10 és +45 °C között használható. Fagypon alatt a hatótáv csökkenhet.

Tárolás

Tartsa távol Eloflex kerekesszékét gyermekektől, amikor nem használja. Tárolja házon belül, fagymentes, száraz, jól szellőző helyen. Tárolási hőmérséklet 0 és +30 °C között.

A töltő

Soha ne takarja le a töltőt, amikor Eloflex kerekesszékét tölti vele. A töltő melegszik és ez baleset vagy sérülés kockázatával jár.

Akkumulátor

Soha ne tárolja az akkumulátort közvetlen napsugárzásnak kitett helyen, vagy olyan helyen, ahol fagypon alá eshet a hőmérséklet. Tárolja az akkumulátort száraz, jól szellőző helyen.

Műszaki adatok

MODEL H

Tömeg	43 kg akkumulátor nélkül
Össztömeg	49,5 kg akkumulátorral
Hatótávolság	40 km
Max teherbírás	200 kg
Sebesség	8 km/h
Motor	2 x szénkefementes motor
Motorteljesítmény	2 x 400 Watt
Akkumulátor	2 x Litium ION 20AH/24V
Akkumulátor Hatás	2 x 480 Wh
Töltési idő	3 óra
Fordulókör	99 cm
Kerekek	Első 9" tömlős, hátsó 13" tömlős
Ülésmagasság	54 cm
Ülésszélesség	51 (56, 61) cm
Ülésmélység	51 cm
Háttámla	Állítható
Méret	103x66x115 cm
Összecsukott méret	83x66x45 cm

© Szerzői jog Eloflex

Ez a dokumentum olyan szerzői jogokat tartalmaz, amely miatt részben vagy egészben nem lehet másolni vagy sokszorosítani az Eloflex írásos engedélye nélkül. Az Eloflex elzárkózik bármilyen nyomdai vagy sajtóhibától ami ebben a dokumentumban található és fenntartja a jogot a változtatáshoz.



2021-05-08

Version 2.0

Sungo Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE

Amsterdam, Netherlands

SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd

No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu

Kapcsolatfelvétel az Eloflex-szel

Amennyiben kérdése van, illetve segítségre van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kezelői központjával vagy a kereskedővel. Ha közvetlenül kapcsolatba szeretne lépni velünk, a kapcsolattartási adatainkat a www.eloflex.eu honlapon találja.



Eloflex

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna

SWEDEN