

BRUGSANVISNING

ELOFLEX H

Det er vigtigt at du læser hele denne brugsanvisning inden du tager din Eloflex i brug, for at være sikker på at du bruger den uden at løbe nogen risiko, og dermed ikke forøger skade på dig, dine omgivelser eller din el-kørestol.



ELOFLEX

Thanks and good luck!

Tak fordi du valgte en Eloflex som din el-kørestol. Det betyder meget for os fordi vores vision er at gøre menneskers hverdag lidt lettere, og at give mennesker som er bevægelseshæmmede en større frihed. Vi håber at det er det du vil opleve når du bruger din nye Eloflex. Vi véd at du kommer til at få stor glæde af din nye el-kørestol. Denne brugsanvisning indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og pleje. Vi opfordrer dig til at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden du tager din Eloflex i brug for første gang. Vi anbefaler også at du øver dig i at køre din Eloflex et sted hvor du kan køre frit og uhindret, så du får fornemmelsen for at køre og styre din Eloflex, inden du bruger den i almindelig sammenhæng. Eloflex el-kørestol er konstrueret til brugere med mange forskellige behov. Beslutningen om hvorvidt en Eloflex er det rigtige for brugeren tages af brugeren selv evt. i dialog med kommunen eller forhandleren. Eloflex fralægger sig ethvert ansvar for tilfælde hvor el-kørestolen ikke passer til brugerens behov.

En Eloflex skal først og fremmest bruges i sin standard udførelse. Hvis el-kørestolen skal tilpasses eller ændres må det kun ske igennem kommunens værksteder eller af Eloflex. Du skal være opmærksom på at skader og fejl som opstår på grund af at man ikke har fulgt brugsanvisningen eller på grund af manglende vedligeholdelse, vil disse ikke være omfattet af garantien.

Held og lykke, og rigtig god fornøjelse med dine nye Eloflex.

Kør forsigtigt!



Indhold	Sidan	Sidan
Iltænkt anvendelse	3	Sikkerhedssele 9
Fold ud og klap sammen	4-5	Justerbar lændestøtte 10
Installér joystik	6	Justér ryggen 10
Fold joystikket ned	6	Juster låsemekanismen 11
Opladning af batterier	7	Transport og opbevaring 11
Manuel kørsel	7	Joystick 12
Justér armlæn	8	Naviger i menuern 13
Fodstøtte	8	Kørsel 14-15
Kørehåndtaget	9	Sikkerhed 16-17
Vippebeslag	9	Teknisk data 18
		Kontakt 18

Tiltænkt anvendelse

Typeklassificering og tiltænkt anvendelse

Eloflex el-kørestole er udviklet for personer som har svært ved at gå eller som ikke kan gå, men har synet, førighed og mentalt er i stand til at styre en el-kørestol. Eloflex el-kørestol har en størrelse og bevægelighed som gør den let at bruge indendørs, men stolen er især egnet til udendørsbrug. I kapitlet "Tekniske data" finder du information om hastighed, venderadius, rækkevidde, maksimal stigning, maksimal vægt på bruger o.s.v. Vi anbefaler at du læser alt om sikkerhed i afsnittet "Sikkerhedsinstruktioner".

Eloflex er testet og godkendt ifølge EN12184: 2014 - klasse B (inden- og udendørs anvendelse). Eloflex er tillige godkendt ifølge ISO-7176, IEC60601 og batterier godkendt ifølge UN38.3.

Eloflex el-kørestole opfylder gældende krav i MDR 2017/745.

Klassificeret som medicinteknisk udstyr klasse 1 og CE-mærkning er udført i overensstemmelse med bilag VIII kapitel III i MDR 2017/745. Vurderingsproceduren er i overensstemmelse med bilag II og III i MDR 2017/745. CE-mærkning bliver ugyldig hvis der anvendes reservedele eller tilbehør som ikke er godkendt til Eloflex.

Anvendelse/Behov

Hensigten med en Eloflex el-kørestol er at kompensere for en skade eller nedsat funktion, hvorfor den anbefales til følgende:

- Hvis brugeren ikke kan, eller er stærkt begrænset i at gå, hvilket gør det svært at bevæge sig omkring i hjemmet og lokalt.
- Hvis der behov for at kunne bevæge sig ud fra hjemmet for at komme ud i den friske luft eller for at kunne komme til de steder som normalt skal besøges for at udføre de daglige ærinder.
- Hvis brugeren har svært ved at komme til, eller at udføre arbejde og andre aktiviteter på grund af sin begrænsede bevægelighed.

Eloflex er egnet til brug både inden- og udendørs, og hvis det på grund af begrænset bevægelighed ikke er muligt at anvende manuel kørestol, men brugeren er i stand til på korrekt vis at håndtere en el-kørestol, er Eloflex det oplagte valg.

Tilbehør

Oplader og pung med almindeligt værktøj ligger i posen under sædet når stolen leveres.

Anvendelse

Anvend kun Eloflex el-kørestol når den er i fuld funktionsdygtig stand. Ellers udsætter du dig selv og andre for risiko. Følgende liste indeholder visse tænkelige situationer. Den beskriver kun visse situationer som kan påvirke anvendeligheden af el-kørestolen.

- Anvend ikke el-kørestolen hvis batterierne er defekte eller deformere.
- Anvend ikke el-kørestolen hvis motorerne kører i ryk eller lyder unormalt.
- Anvend ikke el-kørestolen hvis det virker som om der er fejl ved bremserne.
- Kontakt din kommune eller forhandler hvis dækkene er nedslidt.
- Kontakt din kommune eller forhandler hvis du opdager skade på sikkerhedsbælte, armlæn, sæde, ryglæn, joystick eller anden del af stolen.
- Kontakt din kommune eller forhandler hvis du opdager skade på de elektriske dele (ledninger, batterier, oplader o.s.v.)

Garanti

Du har to års garanti på din el-kørestol fra Eloflex. Garantibetingelser er i overensstemmelse med de gældende nationale og generelle forretningsbetingelser og love. De detaljerede garantibetingelser kan du downloade på www.eloflex.dk. Du skal huske at gemme originalemballagen som du modtog din Eloflex i, under hele garantiperioden. Du kan folde kartonen sammen og opbevare den sammen med de 2 hvide stødpuder i tilfælde af at stolen skal returneres under garantiperioden.

Holdbarhed

Din Eloflex er beregnet til at holde i mindst 5 år. Produktets levetid påvirkes dog i stor udstrækning af hvordan den anvendes og passes. En Eloflex kan have betydeligt længere levetid hvis man passer på den og bruger den som beskrevet i denne skrivelse.

Sikkerhedsinstruktioner og risici


LÆS BÅDE KØREINSTRUKTION OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER GRUNDIGT IGENNEM INDEN DU TAGER DIN ELOFLEX I BRUG.



Fold ud og klap sammen


Fold ud

1. Sæt den sammenfoldede stol oprejst og fold fodstøtten ud. Billede 1.
2. Grip fat i håndtaget bag på ryglænet og træk bagud. Hold samtidig imod med den anden hånd på sædet. Billede 2.
3. Luk låsebeslaget. Billede 3.
4. Fold tipbeskyttelsen ud ved at trykke på knappen og derefter svinge tipbeskyttelsen ud. Billede 4.
5. Hæv armlænerne til den ønskede højde. Billede 5.

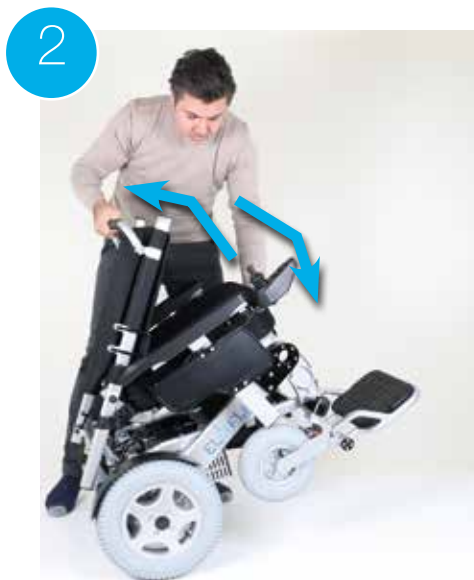


ADVARSEL:

Husk at fæste låseclips inden kørsel!

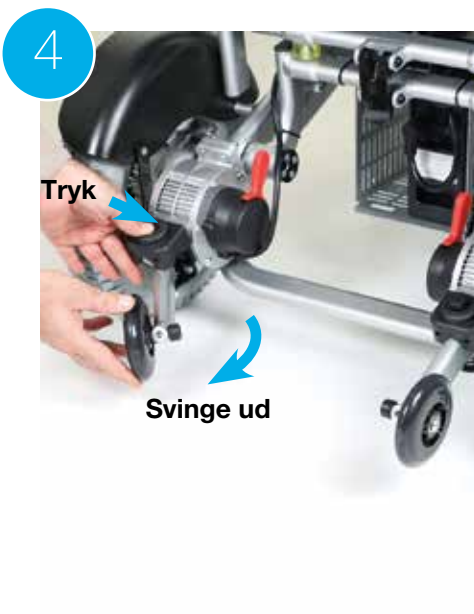

Klap sammen

1. Sænk armlænene. Billede 1.
2. Fold tipbeskyttelsen ind ved at trykke på knappen og derefter dreje dem indad. Billede 2.
3. Åbn låsebeslaget. Billede 3.
4. Greb om håndtaget bag på ryglænet og tryk fremad. Hold samtidig imod med den anden hånd på sædet. Billede 4.
5. Fold fodstøtten ind. Billede 5.

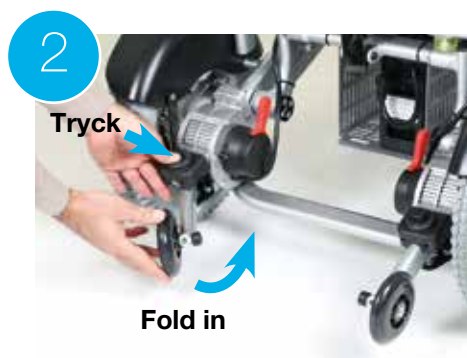

Læs mere...
... om, hvordan man
justerer armlænene, på
side 8.



Installér joystick

Trin 1

Montér joystick i åbningen under armlænet og spænd låshanen samt skrue på modsat side af holderen så låshanen kan låse holderen i den ønskede position.



Trin 2

Saml kabelstikkene, og drej forsigtigt, indtil stifterne går ind i hullerne, og rillerne i de to konnektorer flugter. Skru derefter ærmerne på hvert stik sammen.



VIGTIGT!
Det gøres forsigtigt så
metal stifterne i kontakten
ikke bliver skadet
eller bøjet.

Fold joysticket ned

Holderen på joysticket gør at brugeren hurtigt kan folde joysticket ned, uden at skulle afmontere det fra armlænet. Det betyder at man kan komme ind til bordet og sidde godt når man skal spise.

1. Åben låshanen for at løsne joysticket.
2. Træk forsigtigt joysticket frem, og lad det så svinge ned så det peger mod jorden.



Opladning af batterier

Sådan lader du batterierne op

Start med at slukke for din Eloflex (alle lys på joysticket skal være slukket). Tilslut opladeren til stikket på forsiden af joysticket. Sørg for, at kontakternes position matcher hinanden. Sæt derefter opladerens strømkabel i en stikkontakt.

Opladning angives af en lampe på opladeren. Rød lampe betyder, at opladning er i gang. Efter cirka tre timer er batterierne opladet med 90 procent. Stolen kan nu bruges igen.

Efter ca. 5-8 timer bliver lyset på opladeren grønt, og batterierne er fuldt opladet. Under opladningen bliver selve opladeren varm, og det er normalt. Opladning bør foretages i cirka fem



timer, når bjælken på batteriindikatoren ved joysticket er faldet tre streger.

Batterierne bliver ikke beskadiget af opladning, men for maksimal batterilevetid anbefaler vi, at du frakobler opladeren, når batterierne er fuldt opladte. Opladning af batterierne kan ske ned til -10 grader.



VIGTIGT!
Sæt **ALDRIG** opladeren til opladning direkte nede i batterierne.

Ved opladning ved lavere temperaturer bliver batterierne ikke fuldt opladet.

Hvis din Eloflex bruges i minusgrader, påvirkes kilometertallet. Ved -10 grader kan kilometertallet f.eks. blive reduceret med op til 50 %.

Manuel kørsel

Ryk de 2 røde håndtag som sidder på hver sin motor (se billede) frem imod batterierne, sådan frakobler du de magnetiske bremses. I denne position kan stolen rulles manuelt.


Obs! Hvis brugeren anvender stolen alene uden hjælp skal stolens magnetiske bremses altid været slået til.



Justér armlæen

For optimal siddekomfort kan man justere højen på armlæen.

1. Løsn låsen ved at løfte låshagen.
2. Hæv eller sænk armlæen til den ønskede højde.
3. Spænd låsehagen ned igen.

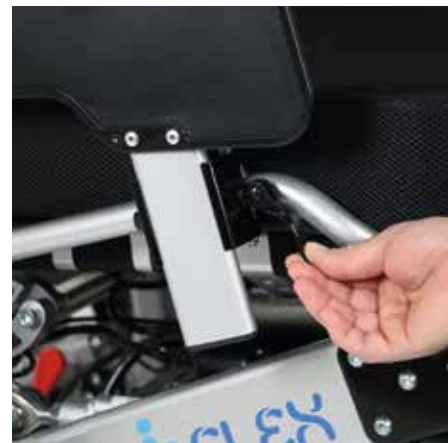

TIP!

Det er også muligt at fjerne armlænene helt for nemmere ind- og udstigning.



Fodstøtte

For lettere ind- og udstigning kan den todelte forstøtte foldes op som vist på billederne nedenfor.



Kørehåndtaget

Kørehåndtaget bruges til at rulle stolen manuelt. Kørehåndtaget kan foldes op, når det ikke bruges.



Vippebeslag

Du kan folde tipbeskyttelsen ind, når stolen foldes sammen og under transport.

1. Tryk på knappen
2. Fold tipbeskyttelsen ind.

OBS! Vippebeslag skal altid være i udslået position når du anvender stolen.



Sikkerhedssele

För säker körning rekommenderar vi att man alltid använder säkerhetsbältet när stolen körs.



Justerbar lændestøtte

Model H er udstyret med en praktisk lændestøtte for optimal siddekomfort. For at justere lændestøtten, gør du følgende:

- 1.** Løft forsiden af ryglænet.
- 2.** Spænd eller løs lændestøtten ved hjælp af velcrobåndet til ønsket støtte.
- 3.** Hvis du ikke ønsker nogen lændestøtte, kan du fjerne hele lændestøtten.



Justér ryggen

Fjern rygdækken ved at trække op i det. Så kan du løsne eller spænde velcrobåndene for at få den ønskede siddestilling. Sæt rygdækken tilbage på plads og pres så velcroen låser dækkenet på plads.




Juster låsemekanismen

Det er vigtigt, at låsemekanismen på din Eloflex bevæger sig trægt op og ned. Den skal bevæge sig så trægt, at den kan stå oprejst af sig selv. Dette er vigtigt for, at låsemekanismen forbliver i sin låste position, selv når fjedrene er trykket sammen.

For at gøre låsemekanismen mere træg, skal du blot stramme beslaget med de to umbracoskruer, der holder låsemekanismen på plads.



Det er vigtigt, at låsemekanismen bevæger sig trægt op og ned for at forhindre, at den åbner sig, når stolen bruges.

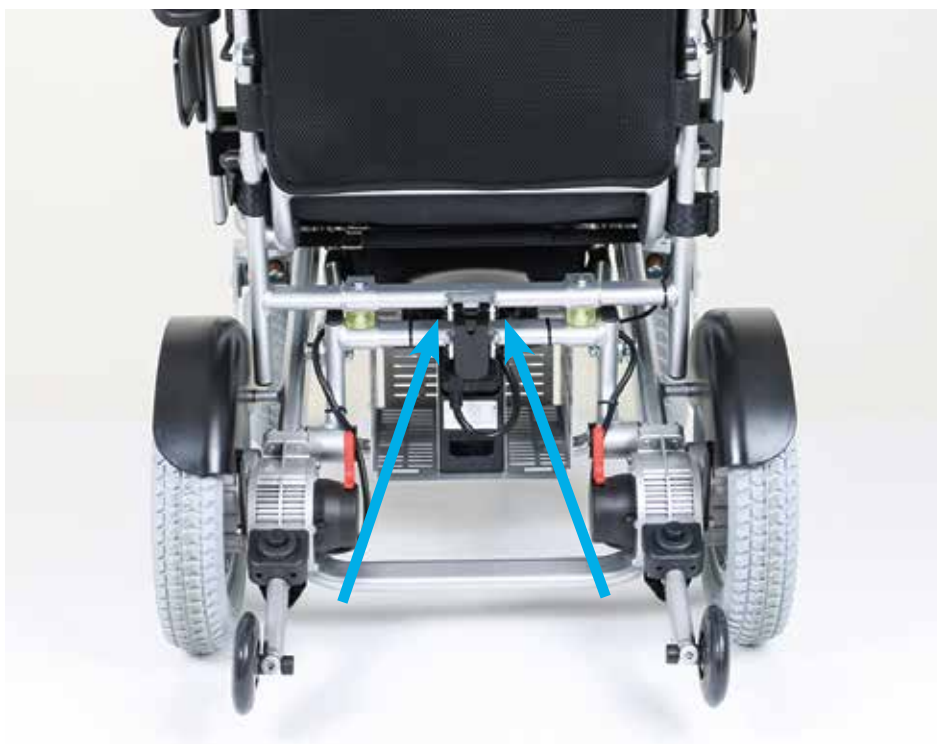

Transport og opbevaring

- For at løfte stolen anbefales det at stolen foldes sammen og stilles op. Derefter kan den løftes. Alternativt skilles den ad og hver del løftes enkeltvis.
- En sammenklappet stol kan lægges i bagagerummet på en bil eller stilles i en garderobe.
- Hvis stolen ikke skal bruges i en længere periode anbefaler vi at batterierne oplades 100% inden stolen stilles væk.
- Stolen skal opbevares indendørs i frostfri, tørre og ventilerede rum. Opbevaringstemperatur 0-30 grader.
- Hvis du skal ud og flyve med din Eloflex anbefaler vi at du først læser den information vi har samlet på vores hjemmeside vedrørende IATA's regler for transport af lithium batterier www.eloflex.dk/faq



- Hvis stolen skal transporteres med andre former for køretjenester end egen bil eller handicaptransport, skal Eloflex fastgøres på de punkter som billederne nedenfor viser. OBS Eloflex er ikke testet som bilsæde under kørsel. Vi anbefaler derfor altid at brugeren anvender køretøjets egne sæder.



Joystik



1

2

3

1 Hastighedsindikator:
Alle linjer hvide = maksimal hastighed.

2 Triptæller: Viser den distance du har kørt og den aktuelle hastighed.

3 Batterikontrol: Angiver, hvor meget strøm der er tilbage i batterierne. Når batterierne er fuldt opladede, er alle bjælker hvide. I takt med, at batterierne aflades, forsvinder bjælkerne. Oplad, når tre bjælker er forsvundet.

USB-kontakt

TIP:
Du kan oplade din mobiltelefon via det USB stik, som sidder i bunden af joystikken.




Opladningsudgang

Lys



Joystik: kontrollerer stolens hastighed og køreretning

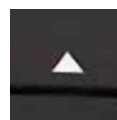


Sæt farten op: Tryk for at øge stolens max hastighed. Tryk og hold nede for at hæve sædet.



Strøm til og fra:
Tryk for at tænde og slukke din Eloflex



Sæt farten ned: Tryk for at sænke stolens max hastighed. Tryk og hold nede for at sænk sædet.

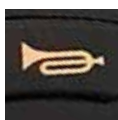

Horn: Tryk for at få opmærksomhed.



Tænd/sluk-lys: Tryk for at tænde eller slukke lyset.

Naviger i menuerne

Skift indstillinger

Du kan ændre stolens indstillinger såsom sprog, hornets lydstyrke og måleenheder.


1. Tryk på den højre multifunktionsknap for at angive indstillingerne.
En liste med flere valgmuligheder åbnes derefter.



2. Du kan rulle op og ned på listen med hastighedsknapperne.



3. Vælg funktion med højre multifunktionsknap (Enter), eller gå et trin tilbage med venstre multifunktionsknap (Return).

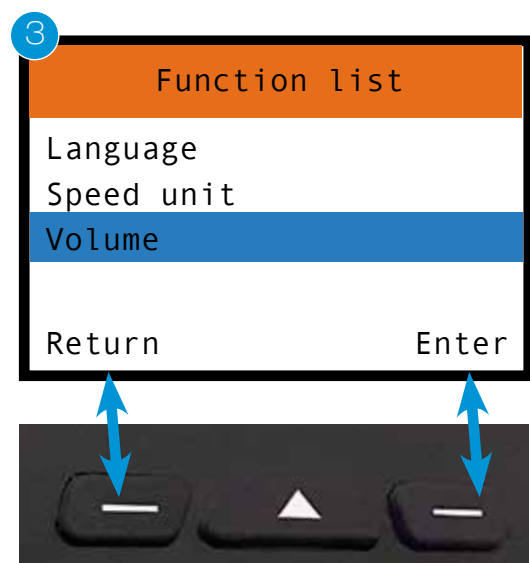

Sikkerhedsinstruktion ved kørsel

Der er risiko for personskade hvis kørestolen vælter.

- Kør kun på stigninger og hældninger som ikke overskrider den maksimalt tilladte hældning.
- Brug altid vippebeslag når du kører med Eloflex.
- Kørsel på nedadgående strækninger bør altid foretages ved lav hastighed.
- Undgå at køre hvor der risiko for at vælte, køre fast eller skride ud.
- Prøv aldrig at køre op eller ned af trapper i din elkørestol
- Kør aldrig over forhindringer højere end den anbefalede maxhøjde.
- Undgå hurtige bevægelser eller ryk med joystik samt pludselige ændringer i køretningen under kørsel.

Risiko for at køre fast hvis man er alene på et øde sted.

- Brugere med stærkt reduceret bevægelighed bør ikke køre længere strækninger udendørs alene.

Risiko for skader ved at foden glider ud af fodstøtten og ind under elkørestolen under kørsel.

- Placér altid fødderne på midten af fodstøtten under kørsel.

Risiko for skader hvis du kolliderer med nogen eller noget i snævre passager.

- Kør igennem snævre passager med laveste hastighed og største opmærksomhed.

Risiko findes for at kørestolen vælter hvis vippebelag afmonteres, skades eller fastgøres på anden måde end beskrevet i monteringsguiden.

- Vippebeslag skal altid være fastgjort når kørestolen anvendes.
- Vippebeslag virker kun på fast underlag. På bløde overflader som f.eks græs og sne kan vippebeslaget miste sin effekt. Kør derfor yderst forsigtigt på bløde underlag.



Læs

Brugeren skal læse disse sikkerheds- og kørselsinstruktioner inden elkørestolen fra Eloflex tages i brug.

Øvelse

Øvelse gør mester. Træn dig i at køre Eloflex sammen med en assistent ved at begynde på et åbent område, gerne udendørs, inden du bruger din elkørestol blandt andre mennesker, i butikker eller restauranter o.s.v. Kør frem ved at bevæge joystick langsomt fremad. Stands ved at slippe joystick.

Bak

Bak/kør baglæns ved at bevæge joystick langsomt bagud. For at standse slipper du joystick. Husk altid at orientere dig i kørselsretningen inden du kører for at være sikker på at ingen eller intet er i vejen for dig.

Vend

Vend ved forsigtigt at bevæge joystick til siden. Orienter dig så ingen eller intet er i vejen for dig når du vender.

Drej

Drej under kørsel ved forsigtigt at bevæge joystick i den retning du ønsker at dreje. Sænk altid hastigheden når du drejer.

Forhindringer

Træn i at undvige og passere forhindringer. Bevæg joystick til siden samtidigt med at du kører frem for at undvige forhindringer. Husk at sænke farten når du nærmer dig forhindringer.

Hurtig kørsel

Bevæg joystick lige frem hvis du vil køre hurtigt. Husk at bevæg joystick tilbage så hastigheden sænkes så snart du føler dig usikker og hvis du skal dreje eller nærmer dig en forhindring.

Kør over en forhindring

Kør langsomt frem til forhindringen og hold øje med at forhjulene er rettet i køreretningen. Bevæg derefter joystick forsigtigt frem samtidigt med at du læner dig lidt bagud for at flytte tyngdepunktet så du kan køre over forhindringen. Eloflex er testet og godkendt til at køre over forhindringer på max 6 cm.

Kør på hældninger

Prøv først at køre lige op eller lige ned af en hældning. Læn dig lidt frem når du kører opad og lidt bagud når du kører nedad for at bevare tyngdepunktet. Undgå at køre sidelæns hvis muligt og kompensér eventuel sidehældning ved at læne dig i modsat retning. Kør altid langsomt på en hældende overflade. Undgå overflader som hælder mere end 9 grader.

Kør med elevator

Husk at checke bredden på elevatordøren samt hvor hurtigt døren lukkes inden du kører ind i elevatoren. Husk at du måske skal kunne bakke ud af elevatoren hvis den ikke er stor nok til at vende i.

Kør på vej

Kør i først og fremmest på fortove, gangstier og cykelstier og kun om nødvendigt på trafikerede veje med din Eloflex.

Krydse vejbaner

Vælg om muligt altid at krydse vejbaner ved lyskryds eller fodgængerfelter. Vær opmærksom på krydsende biler. Kør over fortovet hvor kantsten er nedsænket, hvis det findes. Undgå kantstene som er højere end 6 cm.

Almindelige sikkerhedsinstruktioner

Der er risiko for personskade hvis kørestolen anvendes til andre formål end beskrevet i dette dokument.

- Anvend kun elkørestolen som beskrevet i instruktionen i denne brugsanvisning (se ovenfor, afsnit "Typeklassificering og tiltænkt anvendelse")

Der er risiko for personskade hvis elkørestolen anvendes ved nedsat køreevne.

- Anvend ikke kørestolen hvis din køreevne er nedsat på grund af, men ikke begrænset til, sygdom, medicinering eller alkohol.

Der er risiko for personskade hvis elkørestolen ufrivilligt sættes i bevægelse.

- Sluk elkørestolen før på- og afstigning eller hvis der er risiko for at du eller en anden person eller ting kan komme i berøring med joystick.
- Når motorene er i ulåst position virker bremsen ikke. Derfor må kørestolen kun rulles manuelt på flade strækninger, aldrig på hældninger. Lad den aldrig stå på eller i nærheden af hældninger med bremsen slået fra.

Der er risiko for personskade hvis den elektriske kørestol stoppes under kørsel ved f.eks tænd/sluk knappen eller ved at en ledning rives af, fordi stolen derved stopper hårdt på stedet.

- Slip joystick ved bremsning i nødsituation. Så standser kørestolen automatisk.

Der er risiko for personskade ved fald ud af kørestolen.

- Ryk dig ikke frem, bøj dig ikke fremover imellem knæene og læn dig ikke ud over kørestolens kant, som for eksempel at række ud efter noget.
- Brug altid sikkerhedsbæltet og indstil det hver gang du skal ud at køre.
- Kør så tæt på den nye siddeplads som muligt ved overførsel fra elkørestol til anden siddeplads.

Der er risiko for personskade hvis den maksimalt tilladte vægt overskrides.

- Vær opmærksom på den maksimalt tilladte last (se afsnit "Tekniske Data" bagerst i denne brugsanvisning.)
- Elkørestolen må kun anvendes af enkeltpersoner. Anvend aldrig kørestolen til at transportere mere end 1 person.

Der er risiko for personskade og skader på kørestolen hvis låsegrebet som slås fra ved sammenklapning ikke er korrekt låst fast når kørestolen er i brug.

- Hvis elkørestolens låsegreb ikke er klikket korrekt på plads kan stolen pludselig klappe sammen under brug, hvilket kan forårsage at du vælter ud af kørestolen.
- Undersøg altid at låsegrebet sidder korrekt inden elkørestolen tages i brug.

Der er risiko for personskade og klemskader ved sammen- og udfoldning af kørestolen.

- Fold altid elkørestolen op og sammen som beskrevet i brugsanvisningen.
- Vær opmærksom på at ingen eller intet bliver klemt når du folder stolen op eller sammen.

Der er risiko for personskade og skade på kørestolen hvis den anvendes i fugtige og våde omgivelser.

- Elkørestolen må ikke anvendes under bruseren.
- Elkørestolen må ikke anvendes til badning.



Sikkerhed

Krydse sporveje

Kryds altid jernbanen i lige linie, aldrig sidelæns. Kryds aldrig Jernbanespor alene, her skal du altid have nogen med som kan hjælpe.

Stejle skråninger

Vær forsigtig hvis du kører på stejle hældninger fordi stolen risikere at tippe over. Eloflex er testet og godkendt til hældninger op til 9 grader. Du skal altid have nogen med som kan hjælpe dig, hvis du færdes i områder med kraftige hældninger.

Høje kanter

Vær forsigtig når du kører over en kant. Eloflex er testet og godkendt for kanter op til max. 6 cm. Hvis du færdes i områder med høje kanter skal du altid have nogen med til at hjælpe dig.

Ind og ud af stolen

Vi anbefaler at du altid har nogen som kan hjælpe dig når du skal ind og ud af din Eloflex. Slå strømmen fra inden du flytter dig, så bremserne låser. Slå armlænet og fodstøtten op inden du flytter dig, så bliver det nemmere at komme ned i og ud af stolen.

Foretag ikke reparationer

Forsøg aldrig at lave en defekt elkørestol selv. Hvis du selv ændrer eller forsøger at lave stolen ophører garantien. Kontakt Eloflex, din kommune eller din forhandler. Modificér aldrig din Eloflex selv.

Ikke legetøj

Lad aldrig et barn som ikke selv har erfaring i at bruge elkørestol sidde eller køre i din Eloflex.

Rengøring

Rengør/spul aldrig din Eloflex under/med rindende vand. Bare tør den af med en fugtig klud. Hvis din Eloflex er stram at folde op eller sammen kan du smøre svingdele med 5-56 eller siliconespray.

Pas på overophedning

Efterlad aldrig din Eloflex i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder fordi batterierne kan tage skade. Hold aldrig tæt på åben ild med din Eloflex. Du kan bruge din Eloflex i temperaturer fra -10 grader op til +45 grader uden at stolens funktioner påvirkes.

Opbevar

Opbevar din Eloflex uden for rækkevidde af børn når den ikke bruges. Stolen bør opbevares indendørs i frostfri, tørre og ventilerede lokaler. Opbevaringstemperatur 0-30 grader.

Oplader

Oplader må aldrig tildækkes når den er i brug til opladning af din Eloflex. Opladeren bliver meget varm og der er risiko for ulykke eller skade.

Batterier

Opbevar aldrig batterierne i direkte sollys men heller ikke på et sted som kan have minusgrader. Batterierne skal opbevares på et tørt og ventileret sted.

Teknisk data

MODELL H

Vægt	43 kg uden batterier
Totalvægt	49,5 kg med batterier
Rækkevidde	40 km
Brugervægt	200 kg
Hastighed	8 km/h
Motor	2 x trinløs højeffekt motor
Motorisk effekt	2 x 400 Watt
Batteri	2 x Litium ION 20AH/24V
Batteri effekt	2 x 480 Wh
Opladningstid	3 timer
Venderadius	99 cm
Hjul	Front 9" luft, bag 13" luft
Siddehøjde	54 cm
Siddebredde	51 (56, 61) cm
Siddedybde	51 cm
Ryglæn	Justerbar
Mål	103x66x115 cm
Mål sammenklappet	83x66x45 cm

© Copyright Eloflex

Detta dokument indeholder ophavsretsligt beskyttet information og må hverken helt eller delvis kopieres eller mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse fra Eloflex AB. Eloflex forbeholder sig eventuelle skrivfejl i dette dokument og vi forbeholder os retten til produktændringer.

Kontakta Eloflex

Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp beder vi dig i første omgang om at kontakte din kommune eller forhandler. Hvis du ønsker at kontakte os direkte finder du kontaktoplysninger på vores hjemmeside, www.eloflex.dk.



2021-05-08

Version 2.0

Sungo Europe B.V.

Olympisch Stadion 24, 1076DE

Amsterdam, Netherlands

SRN:NL-AR-000000247

Kunshan Aoshida Electric Technology Co., Ltd

No. 108 Matang Road, Penglang Town, Development Zone, Kunshan City, Jiangsu



Eloflex

Hammarbacken 4B

191 49 Sollentuna

SVERIGE